




FARBE IST **ENERGIE**,  
FARBE IST **LEBEN**,  
FARBE IST **THERAPIE**.



**BIOPTRON AG**  
Sihleggstrasse 23  
CH-8832 Wollerau, Switzerland  
☎ + 41 43 888 28 00  
📠 + 41 43 888 28 99  
✉ light@bioptron.com  
www.bioptron.com

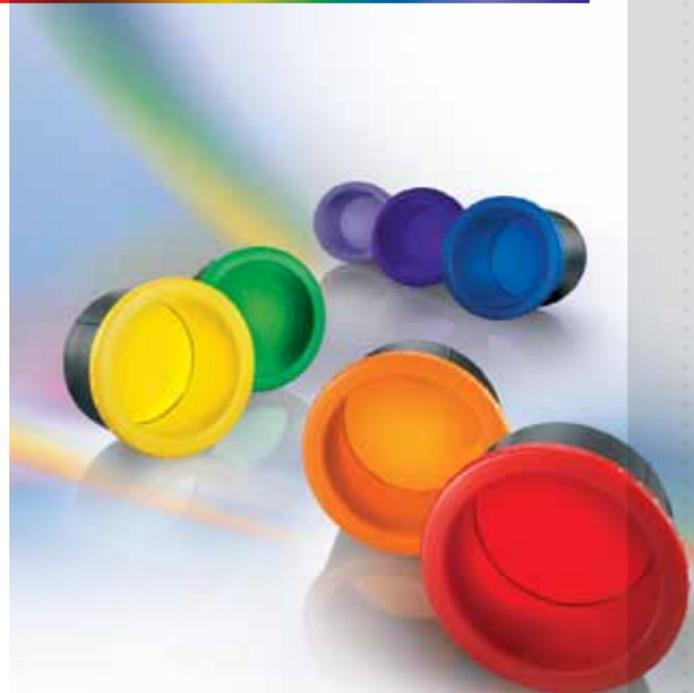

© COPYRIGHT HOME ART & SALES SERVICES AG - ZEPTER GROUP - Code PMB-315-08DE Rev. 1.113 - artwork BRID-MARKETING - Italy

## BIOPTRON COLOR LIGHT THERAPY

ZWEIFACHE FARBLICHT  
THERAPIE DURCH  
BIOINFORMATIONEN



Schließen Sie Ihre Augen und versuchen Sie, sich eine Welt in Schwarz und Weiß vorzustellen: Sie bekommen nur einen ungefähren Eindruck davon, wie wichtig Farben in unserem Leben sind und wie unser Organismus und alle Sinne mit ihnen in Wechselwirkung stehen. Wir leben in einem farbenfrohen Umfeld, in dem Nuancen und Schattierungen unaufhörlich unseren Körper und Geist beeinflussen.

Vor vielen Jahren erkannten einige Wissenschaftler und Ärzte das riesige Potential von Farben und bildeten daraus die Grundelemente der **Chromo-Therapie**. Heutzutage nutzen viele Menschen die Vorteile der Heilkraft von Farben: BIOPTRON Farbtherapie wurde mit einer einzigartigen Technologie ausgestattet, die es Ihnen ermöglicht, Licht und Farben selbstständig und bequem zu Hause anzuwenden.

**BIOPTRON Farblichttherapie ist das Ergebnis langer Erfahrung** im therapeutischen Bereich mit Farben und Licht. Sie arbeitet hauptsächlich auf zwei Arten: **mit Bioinformationen an Druckpunkten oder mit Chakra-Stimulation**. Die Kombination dieser Behandlungen und die Einzigartigkeit der Bioinformations-Filter machen sie zu einer **absoluten Innovation** in der Farbtherapie für Anwendungen zuhause.

Farblichttherapie ist eine Möglichkeit, um mit **Farben und Licht** unsere Energie auszugleichen und zu verbessern und um Körper, Geist und Seele das Gefühl **von Gesundheit, Wohlbefinden und Harmonie** zu bewahren.

Farbe ist nichts anderes als Schwingung und kann unsere Energie erhöhen oder verringern.

Die Farblichttherapie ersetzt nicht immer eine herkömmliche medizinische Behandlung, ist aber eine sehr **wirksame Methode**, um **Ihrem Körper und Geist frischen Antrieb und Ausgeglichenheit** zu geben.

REGENERATION IN EINER  
NEUEN DIMENSION




DIE FARBLICHTTHERAPIE



## FARBEN UND IHRE EIGENSCHAFTEN


Rot

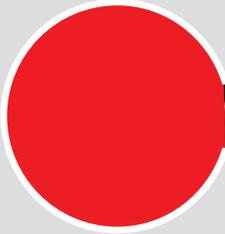

**ROT** steht für Gesundheit, Feuer, Hitze, Blut, Leidenschaft, Willensstärke, Überleben, Wut, Temperament, Gefahr, Zerstörung. Es stimuliert, regt an und wirkt wie ein Reizmittel. Es vermittelt ein Gefühl der Macht. Man verwendet es, um Bewegungen, Reflexe und die Leidenschaft zu erhöhen. Es wird für rote Stopplichter, das Rote Kreuz usw. verwendet.



Orange

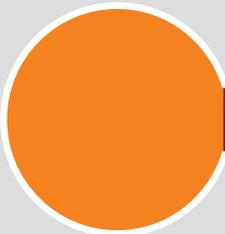

**ORANGE** symbolisiert Wärme und Wohlstand und hat mit Selbstachtung zu tun. Orange Wände im Esszimmer beispielsweise tragen zur Förderung des Familienzusammenhalts bei, orange Sonnenuntergänge fördern Entspannung.




Gelb



**GELB** ist die Farbe von Intelligenz und Empfindung. Seit Jahrhunderten symbolisiert die Farbe Leben und Heiterkeit. Gelb bezieht sich auf den Selbstwert und darauf, wie wir uns selbst fühlen. Es ist die Farbe der Persönlichkeit und des Ichs. Gelb wirkt in mutlosen und melancholischen Momenten psychologisch wohltuend. Gelb ist die Farbe für klare Gedanken, Freisetzung, Helligkeit, Zuversicht, Charme. Um das Selbstbewusstsein zu steigern, wird Unternehmern das Tragen von gelben Krawatten empfohlen.




**GRÜN** ist die Farbe der Liebe, des Fortschritts, der Jugend, des Wachstums, der Unerfahrenheit, Fruchtbarkeit, Hoffnung, des Gleichgewichts und neuen Lebens. Es steht auch für Eifersucht, Neid und Aberglauben, weil es die Farbe der Gefühle ist. Es ist eine ruhige und beruhigende Farbe. Grün wird von Chirurgen getragen, um den Patienten zu beruhigen und stärkt das Immunsystem. Die Farbe bekämpft auch Stress, ein Spaziergang durch die grüne Natur fördert zum Beispiel die Entspannung.

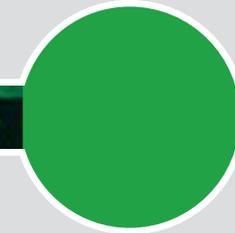


Grün

**BLAU** ist in gefühlsbetonten Momenten psychologisch beruhigender als grün. Blau ist die Farbe der Meditation und der spirituellen Entfaltung und entspannt die Seele. Blau ist die Farbe der Wahrheit, Hingabe, Ruhe und Aufrichtigkeit. Es ist die Farbe der höheren geistigen Qualitäten. Blau hat mit Selbstdarstellung zu tun. Es ist die Farbe des Friedens, des Wohlbefindens und der Sicherheit. Blau in Krankenhäusern vermittelt Ruhe, Geduld und Gesundheit, während blaue Uniformen Sicherheit und Verlässlichkeit suggerieren.

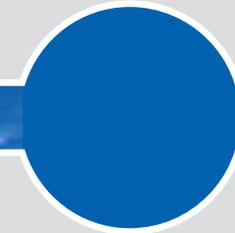


Blau

**INDIGO** ist aus psychologischer Sicht eine gute Farbe für Disziplin, Struktur, Glaube und Leistungsfähigkeit. Es wird auch angenommen, dass die Farbe zur Beseitigung von Suchtgefühlen beiträgt. Indigo bringt Ängste an den Tag, fördert und stärkt die Selbstverantwortung. Es symbolisiert Struktur, Sichtweise und Aufgabe: z. B. dunkle indigo-blaue Anzüge, Schuluniformen usw.

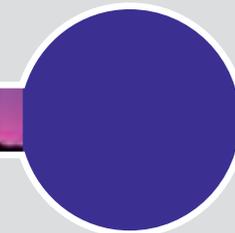

Indigo

**VIOLETT** hat psychologisch mit Selbsterkenntnis und spirituellem Bewusstsein zu tun. Seit jeher ist violett eine heilende Farbe und fördert die Verbindung von Ich und Geist. Violett ist eine sehr kräftige Farbe und sollte nicht bei Kindern angewendet werden. Die entspannende, spirituelle Farbe wird in Kirchen, bei Beerdigungen (man hat das Gefühl, näher bei Gott zu sein, Trost und Verständnis zu erhalten), in therapeutischen Räumen und Altenheimen eingesetzt; violett befreit den menschlichen Geist von alltäglichen Sorgen.

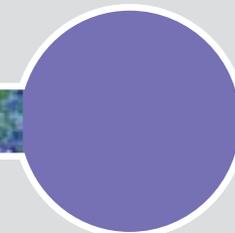

Violett

# BIOPTRON FARBLICHTTHERAPIE: WOHLBEFINDEN FÜR KÖRPER UND GEIST



BIOPTRON Gerät

7 farbige Glasfilter für die Chakrastimulation



Bioinformierte Kosmetikprodukte:



Crystal Cream  
Light Fluid  
Balancing Gel

7 bioinformierte, farbige Glasfilter für  
die Bioinformation auf Pressurpunkte



Das BIOPTRON Licht ist polarisiert. Die elektromagnetischen Wellen des polarisierten Lichts schwingen nur auf parallelen Ebenen - auf diese Weise wirkt das Licht in hohem Maße durchdringend. Es entsteht keine ultraviolette Strahlung und keine übermäßige Wärme: **BIOPTRON ist ein sicheres Gerät** für den Hausgebrauch und **ohne negative Nebenwirkungen**.

Ziel **der Farblichttherapie** ist, die Ursache der Beschwerden und nicht nur deren Symptome, zu bekämpfen und durch Stimulation der **physikalischen und emotionalen Verfassung** wieder ein Gleichgewicht im Körper herzustellen.

BIOPTRON Farblichttherapie basiert auf **2 Grundsätzen der Farblichttherapie** – dem bioinformativen Konzept für Druckpunkte und der Chakra-Stimulation – und unterstützt damit die Wirkung von:

- Licht
- 7 bioinformierten, farbigen Glasfiltern
- 3 bioinformierten Kosmetikprodukten: Light Fluid, Balancing Gel, Crystal Cream

**BIOPTRON Farblichttherapie ist sanft, sicher und effizient.** Sie belebt Sie mit brillanten Farben und den wertvollen bioinformierten Düften und Essenzen in den kosmetischen Produkten. BIOPTRON Farblichttherapie ist ein Wellness-Selbsthilfeprogramm und ersetzt eine ärztliche Behandlung nicht, wenn diese vorgegeben ist. Es ist keine ärztliche Behandlungsmethode.



Die Farbfilter der BIOPTRON Farblichttherapie werden in der Verrerie de St-Just in **Frankreich** noch **von Hand gefertigt**, weil sich traditionell geblasenes Glas durch kräftigeren Glanz und höhere Transparenz auszeichnet. Jeder Farbfilter mit seinem Qualitätsglas garantiert eine **optimale Brechung** des Lichts, zeigt eine brillante Farbintensität und lässt nur den dazugehörigen Anteil des Lichtspektrums passieren.

Zu diesem Zweck wurden die Glasfilter\* nach ihrer Herstellung in Frankreich mit **Bioinformationen** ergänzt. Das biophysikalische Transfersystem, das für die Filter genutzt wird, wurde **vom Züricher Institut für Bioinformation ausschließlich für die BIOPTRON AG entwickelt**.

*\* 6 Glasfilter sind bioinformiert; der Indigo-Filter ist ein spezieller und flacher Rauchglasfilter.*



## BIOPTRON COLOR FILTER

### VERWENDUNG DES ZWISCHENSTÜCKS UND FILTERTAUSCH

1. Entfernen Sie vorsichtig den originalen BIOPTRON Filter. Dieser ist ein essentieller Teil der BIOPTRON Lichttherapie, hat jedoch in der BIOPTRON Farblichttherapie (Bild 7) keine Verwendung. Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Filter. Berühren Sie den Ring des Filters, nicht das Glas. Stecken Sie das Gerät vor dem Filterwechsel aus.
2. Geben Sie das Zwischenstück in das BIOPTRON Gerät (Bild 1). Das Zwischenstück befindet sich unter dem Indigofilter. Das Zwischenstück adaptiert den Durchmesser von 5 cm zu 4 cm.
3. Geben Sie den Farbfilter in das Filterzwischenstück (Bild 2). Berühren Sie nur den Ring des Filters, nicht das Glas.
4. Das Gerät ist nun bereit für die Benutzung mit dem Glasfilter. Stecken Sie das Gerät wieder an.

Da die Glas-Farbfilter mundgeblasen sind, sind kleine Unregelmäßigkeiten möglich (wie kleine Blasen oder Flecken). Diese haben keinerlei Einfluss auf ihre therapeutische Wirkung.

### VERWENDUNG DES BIOPTRON

Halten Sie einen Abstand von ca. 10 cm ein und richten Sie den farbigen Lichtkegel des BIOPTRON-Geräts auf die zu behandelnde Stelle. Wenn ein kleiner Bereich behandelt wird, der vollkommen von dem Lichtkegel abgedeckt wird, das Gerät ruhig halten. Wird eine größere Körperstelle behandelt, das Gerät langsam bewegen, um sie Punkt für Punkt abzudecken.

Hastige Bewegungen führen zu Unruhe und stören den Therapieverlauf.

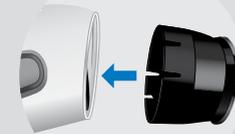


Abbildung 1

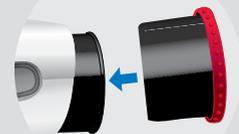


Abbildung 2

## FARBLICHTTHERAPIE DURCH CHAKRASTIMULATION



BIOPTRON Gerät

7 farbige Glasfilter für Chakrastimulation



Basierend auf dem Grundsatz der Chakra-Farbenstimulation ist die Farblichttherapie mit 7 Farbfiltern für die wirksame Chakra-Stimulation ausgestattet die ergänzend zum ergänzend Bioinformations-Konzept angewandt wird.

Die Farblichttherapie arbeitet mit den **7 Hauptchakren**, die die Energiezentren des menschlichen Körpers sind. Jedes Chakra ist eine pulsierende Spirale aus Energie. Sie sind unsere farbigen Batterien: wenn sie voll aufgeladen sind, befinden wir uns in einem Gleichgewichtszustand, in Gesundheit und Wohlbefinden; ist eine von ihnen leer, leidet unser gesamtes System darunter.

Die Farblichttherapie sorgt dafür, dass diese "Chakra-Batterien" voll bleiben.

Die mit den einzelnen Farben des Spektrums verbundenen Frequenzen entsprechen der Energie jedes der 7 Hauptchakren unseres Körpers und der **Organe, Muskeln und Knochen**, die sich in unmittelbarer Umgebung des Chakra befinden. Orange zum Beispiel steht mit dem Sakralchakra in Verbindung und darüber hinaus mit den Eierstöcken, Hoden, Nieren, dem Becken, der Milz und dem Darm. Die Chakren sind auch mit unseren **Hormondrüsen** verbunden, die die Hormone produzieren.

Die Beschreibungen in der nachfolgenden Tabelle sind Beispiele für herkömmliche Anwendungen:

Mit sieben BIOPTRON Farbfiltern können **die individuellen Chakren aktiviert werden** und sich kraftvoll auf Ihren Körper, Geist und Seele auswirken. Falls ein Chakra mit seiner speziellen Farbe überladen ist, kann es mit der Komplementärfarbe wieder ins Gleichgewicht gebracht werden.

CHAKRA	FARBE	ORT	PHYSIOLOGISCHER ZUSAMMENHANG	HORMONELLE REIZE	PHYSIOLOGISCHE REAKTION
Wurzelchakra	<b>Rot</b>	Unterer Abschnitt der Wirbelsäule	Nebennieren, Mastdarm	Adrenalin	Furcht oder Mut, Selbstbewusstsein
Sakralchakra	<b>Orange</b>	Unterer Bauchbereich	Eierstöcke, Hoden, Nieren, Darm	Geschlechts-Hormone	Freude, Selbstachtung
Solarplexus-chakra	<b>Gelb</b>	Magen	Bauchspeicheldrüse, Leber, Verdauungstrakt, Haut	Insulin	Klarheit, Selbstwert
Herzchakra	<b>Grün</b>	Herz	Thymus, Immunsystem, Kreislauf, Lungen	Thymosin	Mitgefühl, Liebe
Halschakra	<b>Blau</b>	Hals	Schilddrüse, Atemwege	Thyroxin	Kommunikation, Selbstdarstellung
Stirnchakra	<b>Indigo</b>	Stirn	Hirnanhangsdrüse, Augen, Nebenhöhlen	Stimulierende Hormone	Intuition, Selbstverantwortung
Scheitelchakra	<b>Violett</b>	Kopfspitze	Zirbeldrüse, Gehirn, Nervensystem	Melatonin	Erleuchtung, Selbsterkenntnis



# ANWENDUNG DER FARBEN ZUR CHAKRA-STIMULATION



## WURZELCHAKRA - ROT

ES WIRD ANGENOMMEN, DASS ROT	ORT	ZEIT
die Nerven anregt und erregt; daher heisst es, dass es bei Beeinträchtigungen von Geruch, Berührung, Sehen, Hören und Geschmack nützlich ist	Wurzelchakra	Rot 10 Min., Blau 2 Min. drei Wochen lang
den Blutkreislauf anregt (Anwendung beim Frieren)	Wurzelchakra	Rot 20 Min., Blau 5 Min.
erschöpfte Energie wieder auffüllt	Wurzelchakra	Rot 15 Min., Blau 3 Min. nach Bedarf
die Leber anregt	rechte Bauchseite	Rot 3-5 Min., Blau 1 Min. 1 Woche lang
eine positive Wirkung auf die Muskulatur bei Behandlung eines Hexenschusses hat	auf den angespannten Muskel	Rot 10 Min., Blau 2 Min. zweimal pro Tag, bis die Schmerzen nachlassen
einen lindernden Einfluss auf arthritische Schmerzen hat	auf schmerzhafte Bereiche	Rot 5 Min., Blau 1 Min. bis die Schmerzen nachlassen



## SAKRALCHAKRA - ORANGE

ES WIRD ANGENOMMEN, DASS ORANGE	ORT	ZEIT
die Herzfrequenz sanft anregt, ohne den Blutdruck nachhaltig zu beeinflussen (Anwendung bei niedrigem Blutdruck, wenn eine Herzerkrankung vorliegt)	Sakralchakra	Orange 3-5 Min., Indigo 1 Min. einmal pro Tag, bis es zu einer Besserung kommt
einen positiven Einfluss auf die Heilung von Bänderrissen oder Knochenbrüchen hat	im Bereich der Verletzung	Orange 3-5 Min., Indigo 1 Min. zweimal pro Tag bis zur vollständigen Heilung
eine sanft antidepressive Wirkung hat	Sakralchakra	Orange 5 Min., Indigo 1 Min. pro Tag bis sich die Situation bessert
Periodenschmerzen oder Ungleichgewicht in der Menopause lindern kann	Sakralchakra	Orange 5 Min., Indigo 1 Min. 5 Tage lang
die Milchbildung nach der Entbindung sanft anregen kann	auf jede Brust	Orange 3 Min., Indigo 1/2 Min. einmal pro Tag
stärkend auf die Lungen wirken kann	auf jede Lunge	Orange 3 Min., Indigo 1/2 Min. eine Woche lang



## SOLARPLEXUSCHAKRA - GELB

ES WIRD ANGENOMMEN, DASS GELB	ORT	ZEIT
eine positive Wirkung auf die Nerven und das Nervensystem hat; es wird angewendet, um die Nerven zu stärken und das Gehirn anzuregen	Solarplexus	Gelb 10 Min., Violett 2 Min.
den Blutkreislauf entgiften kann, indem es das Lymphsystem anregt	Solarplexus	Gelb 3-5 Min., Violett 2 Min. drei Wochen lang, vorzugsweise zusammen mit einer leichten Diät
Verstopfung lindern kann	auf den Bauchnabel	Gelb 10 Min., Violett 2 Min., bis zur Heilung
positiv auf psychische Erschöpfung wirken kann	Solarplexus	Gelb 15 Min., Violett 3 Min. 2-3 Tage lang
die Verdauung fördern kann; Magenübersäuerung lindern kann	Solarplexus	Gelb 20 Min., Violett 5 Min.
eine regenerierende Wirkung auf die Haut hat	Solarplexus und Hautbereich	Gelb 10 Min., Violett 2 Min., einmal pro Woche



# ANWENDUNG DER FARBEN ZUR CHAKRA-STIMULATION



## HERZCHAKRA - GRÜN

ES WIRD ANGENOMMEN, DASS GRÜN	ORT	ZEIT
auf das sympathische Nervensystem (ein Teil des zentralen Nervensystems) wirkt. Es wird vermutet, dass es sanft entspannend auf Blutgefäße wirkt und den Blutdruck leicht senken kann	Herzchakra	Grün 5 Min., Rot ½ Min., bis zur Besserung
als Stärkungsmittel wirkt	Herzchakra auf der Wirbelsäule	Grün 20 Min., Rot 2 Min.
emotional beruhigend ist	Herzchakra	Grün 10 Min., Rot 1 Min.
positiv auf Gewebe und Muskelbildung wirkt	auf zu kräftigende Muskeln	Grün 10 Min., Rot ½ Min., bis zur Besserung
für die Behandlung von Schockzuständen geeignet ist	Herzchakra	Grün 10 Min., Rot ½ Min.
als mildes Desinfektionsmittel, als keimtötendes, antiseptisches und bakterizides Mittel wirkt	betroffener Bereich	Grün 20 Min., Rot 1 Min.




## HALSCHAKRA - BLAU

ES WIRD ANGENOMMEN, DASS BLAU	ORT	ZEIT
eine kühlende Wirkung auf entzündliche Erkrankungen hat	Halschakra	Blau 10 Min., Rot 1 Min., zweimal pro Tag bis zur Besserung
den Stoffwechsel und die Vitalität steigert	Halschakra	Blau 10 Min., Rot 1 Min., einmal pro Woche
nervöse Erregung lindern kann	Halschakra, Halsrücken	Blau 20 Min., Rot 2 Min.
bei Halsschmerzen, Kehlkopzentzündung, Mandelentzündung, Geschwüren im Mundbereich und ‚verstopften‘ Ohren sanft lindernd wirken kann	Halschakra	Blau 10 Min., Rot 1 Min., zweimal pro Tag
hyperaktive Kinder beruhigen kann	Halschakra	Blau 10 Min., Rot 1 Min., einmal pro Tag, eine Woche lang
die Heilung bei leichten Verbrennungen beschleunigen kann	dort, wo die Verbrennungen aufgetreten sind	Blau 10 Min., Rot 1/2 Min., zweimal pro Tag, bis zur Besserung



## STIRNCHAKRA - INDIGO

ES WIRD ANGENOMMEN, DASS INDIGO	ORT	ZEIT
ein hervorragendes Gegenmittel gegen Schlaflosigkeit ist	Stirnchakra	Indigo 10 Min., Orange 1 Min.
die Gewebeneubildung begünstigt	bei Verbrennungen	Indigo 5 Min., Orange 1 Min., zweimal pro Tag nach Bedarf
akute Nebenhöhlenprobleme lindern kann	Stirnchakra, Augen	Indigo 5 Min., Orange 1 Min., zweimal pro Tag nach Bedarf
Rückenschmerzen lindern kann	Stirnchakra und auf den schmerzhaften Bereich	Indigo 10 Min., Orange 1 Min.
lindernd und hemmend auf Blutungen wirken kann	auf die blutende Stelle des Körpers	Indigo 20 Min., Orange 2 Min.
die Heilung von Ekzemen sanft beschleunigen kann	auf die Haut	Indigo 5 Min., Orange 1 Min., eine Woche lang

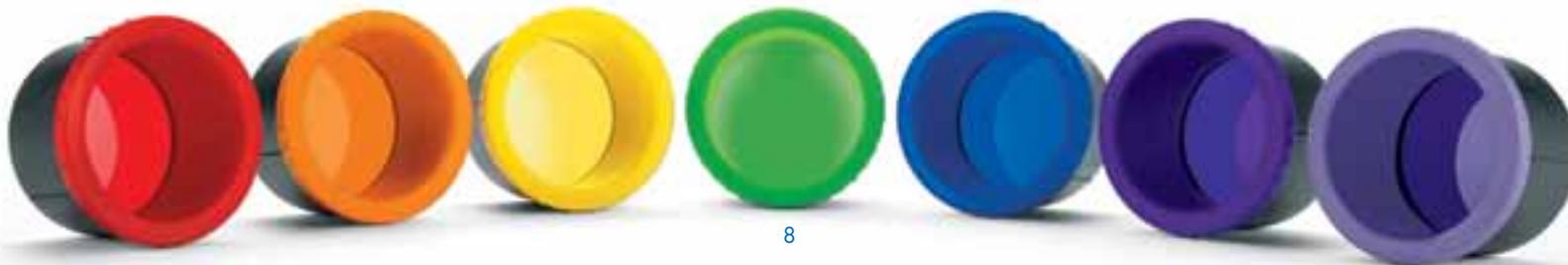



## SCHEITELCHAKRA - VIOLETT

### ES WIRD ANGENOMMEN, DASS VIOLETT

einen positiven Einfluss auf Menschen mit psychischen Problemen hat

### ORT

Scheitelchakra  
Richtung  
Hinterkopf

### ZEIT

Violett 10 Min.,  
Gelb 1 Min.,  
eine Woche lang

antiseptisch auf die Haut wirken kann

auf die  
Hautbereiche

Violett 5 Min.,  
Gelb 1 Min.

stimulierend auf die Bildung weisser Blutkörperchen in der Milz wirken kann

rechte  
Bauchseite

Violett 15 Min.,  
Gelb 1 Min.,  
eine Woche lang

zu einer Erweiterung der Blutgefäße führen und dadurch den Blutdruck sanft senken kann

Scheitelchakra

Violett 10 Min.,  
Gelb 1 Min.,  
eine Woche lang

eine beruhigende Wirkung auf das Nervensystem und Herz hat, lindernd auf Kopfschmerzen wirken kann

Scheitelchakra  
Richtung  
Hinterkopf

Violett 15 Min.,  
Gelb 1 Min.,  
eine Woche lang

lindernd auf Kopf- und Kopfhautprobleme sowie auf Gehirnerschütterungen wirken kann

Scheitelchakra

Violett 15 Min.,  
Gelb 1 Min.

SCHEITELCHAKRA

STIRNCHAKRA


HALSCHAKRA

HERZCHAKRA

SOLARPLEXUS  
CHAKRA

SAKRALCHAKRA

WURZELCHAKRA

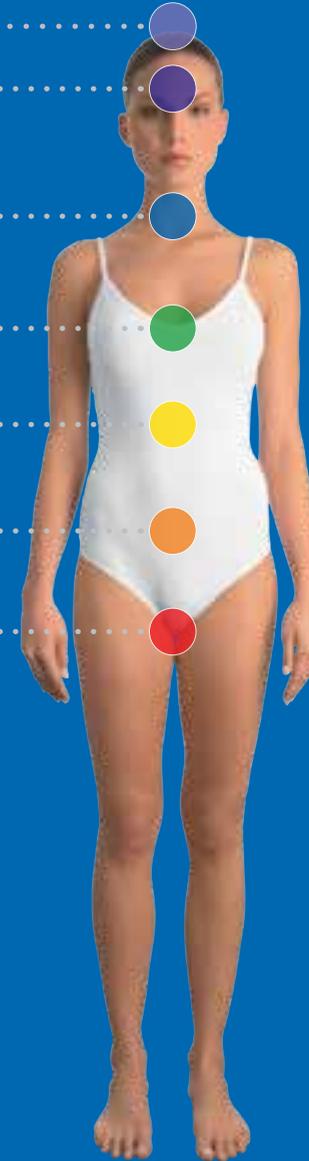

## FARBLICHTTHERAPIE DURCH BIOINFORMATION AUF PRESSURPUNKTE



BIOPTRON Geräte



7 bioinformierte, farbige Glasfilter für das Konzept der Bioinformation auf Pressurpunkte



Rot  
Orange  
Gelb  
Grün  
Blau  
Indigo  
Violett

Bioinformierte Kosmetikprodukte:



Crystal Cream  
Light Fluid  
Balancing Gel

Biopton ist ein einzigartiges Farblichttherapiegerät, das, hergestellt in der Schweiz, mit bioinformierten Filtern arbeitet und die Druckpunkte-Anwendung mit der Chakra-Farbtherapie kombiniert.


**Bioinformation** basiert auf der These, dass der menschliche Körper kontinuierlich ein Feld aus elektromagnetischen Strahlen aussendet, das manche auch als *Aura* bezeichnen. Dieses **elektromagnetische Feld**, das den Körper umgibt, ist das Licht, das Ihr Körper ausstrahlt: demnach sind wir alle "lebende Photozellen", ähnlich den Pflanzen, und diese Licht *Photosynthese* entspricht in etwa dem *Stoffwechsel*, der in unserem Körper stattfindet.

Das elektromagnetische Feld, das jedes Lebewesen umgibt, liefert wesentliche Informationen über jeden einzelnen Organismus: diese Art der Information, zusammen mit dem Zustand des physikalischen Körpers, nennt man **Bioinformation**.

Der regenerative Prozess wird aus **Pflanzen, Edelsteinen, Metallen, Mineralien, Spurenelementen, aber auch aus Edelgasen, Fermentierungsprozessen** usw. gewonnen.

Werden sie auf geeignetes Trägermaterial aufmoduliert, können sie die Selbstheilungskräfte im Körper gezielt ansteuern. Durch sein elektromagnetisches Feld tauscht der Körper eine ganze Reihe von entscheidenden Bioinformationen aus.

**BIOPTRON Farblicht und pflanzliche Essenzen:** aufgetragen auf den Körper oder einzelne Organe, können sie Ihr Gleichgewicht und Ihr Wohlbefinden wieder herstellen.

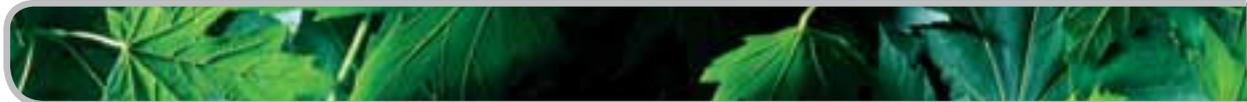

## EINE EXQUISITE MISCHUNG AUS KRÄFTEN UND DÜFTEN

Die BIOPTRON Farblichttherapie wurde speziell für den Einsatz an Druckpunkten entwickelt und wird durch drei hervorragende, bioinformierte, qualitativ hochwertige Kosmetikprodukte ergänzt, welche die Haut entspannen und für eine bessere Aufnahme des Farblichts vorbereiten und so für einen langanhaltenden Effekt sorgen..

- **Light Fluid**
- **Balancing Gel**
- **Crystal Cream**

**Sie sind ein integrierter Teil und ein notwendiger Bestandteil der Bioinformations-Farbtherapie an Druckpunkten.** Diese drei Produkte werden aus den erlesensten **Tinkturen, Extrakten und ätherischen Ölen** hergestellt und gemixt, um Harmonie und Ausgeglichenheit in Ihr Innerstes zu bringen. Zusammengestellt aus rein natürlichen Produkten wie Koskossnuss, Getreide, Samenkernen, wird diese Mischung aus Essenzen und Farben mit Bioinformationen angereichert, die die Druckpunkt-Farbtherapie noch effizienter und angenehmer machen. Das Fluid, das Gel und die Creme **sollten gemäß den speziell für die BIOPTRON Farblichttherapie entwickelten 5 verschiedenen Programmen angewendet werden.**

Die drei Produkte werden in einer Verpackungseinheit geliefert und können getrennt ersetzt werden.

Um die **BIOPTRON Farblichttherapie für Druckpunkte richtig anzuwenden, haben wir für Sie 14 spezielle Behandlungspläne** zusammengestellt. Bitte lesen Sie diese vor Ihrer ersten Anwendung aufmerksam durch, um beim Gebrauch Ihres außergewöhnlichen Farbtherapiegerätes das bestmögliche Ergebnis zu erhalten.

## ANWENDUNG DER BIOINFORMIERTEN KOSMETIKPRODUKTE

BIOPTRON bioinformierte Kosmetikprodukte können für allgemeine kosmetische Anwendungen eingesetzt werden und als integrierter Teil der Anwendungsprogramme der BIOPTRON Farblichttherapie.

- **Light Fluid:** sprühen Sie das Light Fluid auf die zu behandelnde Zone auf. Lassen Sie es einen Moment einwirken und wischen Sie dann die auf der Haut gelösten Schweiß- und Schmutzpartikel ab. Menschen, die auf ätherische Öle empfindlich reagieren, könnten ein kurzes (aber völlig harmloses) Brennen in den Augen verspüren. In diesem Fall sprühen Sie das Light Fluid keinesfalls in Augennähe auf.

**Für Ihr Hautpflegeprogramm:** Wann auch immer Sie Ihre Haut erfrischen und befeuchten wollen, tragen Sie es auf Ihr Gesicht, Hals, Dekolleté und Ihren Körper auf. Passend um die Feuchtigkeit Ihrer Haut in beheizter und klimatisierter Umgebung während heißer Sommer und kalter Wintertage aufrecht zu erhalten.

- **Balancing Gel:** halten Sie die Öffnung der Flasche über die geöffnete Hand und drücken Sie kurz auf den Dispenser. Verteilen Sie das Balancing Gel auf der zu behandelnden Zone.

**Für Ihr Hautpflegeprogramm:** Massieren Sie es morgens und/oder abends über Ihr ganzes Gesicht und Ihren Körper und lassen Sie den angenehmen, kühlenden Effekt dieses Gels Ihre Sinne erwecken.

- **Crystal Cream:** halten Sie die Öffnung der Flasche über die geöffnete Hand und drücken Sie kurz auf den Dispenser. Verteilen Sie das Balancing Gel auf der zu behandelnden Zone.

**Für Ihr Hautpflegeprogramm:** Tragen Sie es morgens und/oder abends nach Ihrer regulären Reinigung auf, um ein jüngeres Hautbild zu erhalten. Diese Creme ist ideal, um trockene Haut während des Tages zu beruhigen und Ihre Haut nachts zu befeuchten.

## BIOPTRON BIOINFORMIERTE KOSMETIKPRODUKTE DER FARBLICHTTHERAPIE





## ÜBER 5 PROGRAMME IN 14 BEHANDLUNGSTABELLEN

Die 12 Anwendungen für die perfekte Verwendung der BIOPTRON Farblichttherapie sind in fünf Programmen integriert.

Bitte verändern Sie den Ablauf dieser 14 Behandlungspläne nicht. Ihre Reihenfolge ist von energetischen und dynamischen Zusammenhängen bestimmt. Um die optimalsten Resultate zu erzielen, muss man sich genau und konstant an die Behandlungspläne halten. Bitte verwenden Sie dazu die Anwendungsbeschreibung.

### Programm 1:

#### **ABWEHRKRÄFTE**

- 1 - UNTERSTÜTZEN DER ABWEHRKRÄFTE

### Programm 2:

#### **ENERGIERESERVEN**

- 1 - ENERGIEMANGEL BEKÄMPFEN
- 2 - KONZENTRATIONS- UND GEDÄCHTNIS-SCHWÄCHE STÄRKEN
- 3 - INNERE HARMONIE WIEDERAUFBAUEN

### Programm 3:

#### **SEELISCHES WOHLBEFINDEN**

- 1 - INNERES GLEICHGEWICHT
- 2 - LEBENSFUNKE
- 3 - ENTSPANNUNG BEI ANGST
- 4 - DEBLOCKIERUNG BEI STRESS
- 5 - BESSERER SCHLAF

### Programm 4:

#### **STOFFWECHSEL**

- 1 - AUSSCHIEDEN UND ENTSCHLACKEN
- 2 - VERDAUUNG

### Programm 5:

#### **HAUT UND GEWEBE**

- 1 - PROBLEMHAUT IM GESICHT ODER AM KÖRPER HEILEN
- 2 - SCHWEREGEFÜHL IN BEINEN UND FÜSSEN REDUZIEREN
- 3 - GUT AUSSEHEN



# PROGRAMM 1: ABWEHRKRÄFTE (1 Tabelle)

## Tabelle 1: UNTERSTÜTZEN DER ABWEHRKRÄFTE

Ihre Widerstandskraft erreicht ein ständiges Hoch und Sie werden sich stark fühlen

Siehe Anwendungshinweis B (siehe Seite 16)

ANWENDUNGSSCHRITTE	Dauer
<b>MORGENS</b>	12 min
<b>1 - MUND UND PHARYNX</b>	
• Verwenden Sie den ORANGENEN Farbfiler	2 min
<b>2 - HALS UND SCHLÜSSELBEIN</b>	
• Light Fluid auf Hals und Schlüsselbein auftragen	
• Verwenden Sie den ROTEN Farbfiler auf dem Hals unter dem Rand des Unterkiefers von rechts nach links	1 min
• Tragen Sie Balancing Gel auf Hals und Schlüsselbein auf	
<b>3 - BRUSTBEIN</b> <i>1 Handbreit unter der Schlüsselbeingrube (Thymusdrüse)</i>	
• Light Fluid auftragen	
• Den GRÜNEN Farbfiler verwenden	1 min
• Crystal Cream auftragen	
<b>4 - MILZ</b>	
• Light Fluid auftragen	
• Den GELBEN Farbfiler verwenden	2 min
• Balancing Gel auftragen	
<b>5 - HÄNDE</b> <i>Zwischen den unteren Gelenken von Daumen und Zeigefinger (weiches Dreieck)</i>	
• Light Fluid auftragen	
• Den GELBEN Farbfiler auf der linken und rechten Hand anwenden	jeweils 1 min
<b>6 - FUßSOHLEN</b>	
• Light Fluid auftragen	
• Balancing Gel auftragen	



ANWENDUNGSSCHRITTE	Dauer
(1 Stunde vor dem Schlafengehen)	
<b>ABENDS</b>	7 min
<b>1 - STEISSBEIN</b>	
• Light Fluid auftragen	
• Den ROTEN Farbfiler verwenden	2 min
<b>2 - NABEL</b>	
• Light Fluid auftragen	
• Verwenden Sie den ORANGENEN Farbfiler	2 min
<b>3 - BRUSTBEIN</b> <i>1 Handbreit unter der Schlüsselbeingrube (Thymusdrüse)</i>	
• Light Fluid auftragen	
• Den GRÜNEN Farbfiler verwenden	1 min
<b>4 - STEISSBEIN, NABEL, BRUSTBEIN</b> <i>(gesamte Länge)</i>	
• Crystal Cream auftragen	



# PROGRAMM 2: ENERGIERESERVEN (3

## Tabelle 1: DAUER 15 MIN ANTRIEBSLOSIGKEIT

Ihre Schwäche wird sich in neue Kraft verwandeln

Siehe Anwendungshinweis A (siehe Seite 16)

ANWENDUNGSSCHRITTE	Dauer
<b>1 - NIEREN</b>	
• Light Fluid auftragen	
• Verwenden Sie den GELBEN Farbfiler auf der linken und rechten Niere	2 min
• Balancing Gel auftragen	
<b>2 - SOLAR PLEXUS</b> <i>Leber – Gallenblase – Magen – Milz</i>	
• Light Fluid auftragen	
• Verwenden Sie den ORANGENEN Farbfiler	3 min
• Balancing Gel auftragen	
<b>3 - FÜSSE</b> <i>Innere Randknochen (Reflexzone der Wirbelsäule)</i>	
• Light Fluid auftragen	
• Den VIOLETTEN Farbfiler von der Ferse bis zum großen Zeh anwenden	jeweils 1 min
• Crystal Cream auftragen	
<b>4 - BRUSTBEIN</b> <i>1 Handbreit unter der Schlüsselbeingrube (Thymusdrüse)</i>	
• Light Fluid auftragen	
• Den GRÜNEN Farbfiler verwenden	1 min
• Den GELBEN Farbfiler verwenden	1 min
• Crystal Cream auftragen	



**Tabelle 2: DAUER 20 MIN  
KONZENTRATIONSMANGEL UND GEDÄCHT-  
NISSCHWÄCHE**

Ihr Geist wird erfrischt und verbessert Ihre Konzentrationsfähigkeit und Ihre Gedächtnisleistung

Siehe Anwendungshinweis E (siehe Seite 16)

ANWENDUNGSSCHRITTE	Dauer
<b>1 - GESICHT - HALS - SCHLÜSSELBEIN</b>	
• Light Fluid auftragen	
<b>2 - FÜSSE</b>	
• Light Fluid auf Spann und Fußsohle auftragen	
• Den VIOLETTEN Farbfiler auf dem linken und rechten Spann des Fußes anwenden	jeweils 1 min
• Den VIOLETTEN Farbfiler auf der linken und rechten Fußsohle anwenden	jeweils 1 min
• Balancing Gel auf Spann und Fußsohle auftragen	
<b>3 - KNIE Innen- und Außenfläche</b>	
• Light Fluid auftragen	
• Den BLAUEN Farbfiler verwenden - auf der linken und rechten Innenfläche	1 min
- auf der linken und rechten Außenfläche	1 min
<b>4 - NABEL</b>	
• Light Fluid auftragen	
• Den GRÜNEN Farbfiler verwenden	1 min
• Crystal Cream auftragen	
<b>5 - BRUSTBEIN</b> <i>1 Handbreit unter der Schlüsselbeingrube (Thymusdrüse)</i>	
• Light Fluid auftragen	
• Den BLAUEN Farbfiler verwenden	1 min
• Crystal Cream auftragen	
<b>6 - HALS Kehle, über der Kehलगrube (Thymusdrüse)</b>	
• Den GELBEN Farbfiler verwenden	
<b>7 - HINTERKOPF, MITTE</b>	
• Den ROTEN Farbfiler verwenden	
<b>8 - KOPF, AUGEN, OHR ZU OHR ÜBER DEN OBEREN SCHÄDELBEREICH</b>	
• Den ORANGENEN Farbfiler verwenden	
- bei geschlossenem rechten Auge	1 min
- vom linken zum rechten Ohr über den oberen Schädelbereich	1 min
- mit geschlossenem linken Auge	1 min
- vom rechten zum linken Ohr über den oberen Schädelbereich	1 min
<b>9 - GESICHT, HALS, SCHLÜSSELBEIN</b>	
• Balancing Gel auftragen	
• Crystal Cream auftragen	



**Tabelle 3:  
INNERE HARMONIE WIEDERAUFBAUEN**

Sie werden sich gut, entspannt und energiegeladen fühlen.

Siehe Anmerkung H (siehe Seite 16)

ANWENDUNGSSCHRITTE	Länge
<b>MORGENS</b>	8 min
<b>1 - LINKE UND RECHTE SOHLE</b>	
• Tragen Sie das Light Fluid auf Ihre Fußsohle auf	
• Verwenden Sie den farbigen INDIGO Filter auf der linken und rechten Sohle	jeweils 1 min
• Tragen Sie das Balancing Gel auf Ihre Fußsohle auf	
<b>2 - NABEL</b>	
• Tragen Sie das Light Fluid vom Nabel bis zur Nackenmitte auf	
• Verwenden Sie den GRÜNEN Farbfiler	1 min
• Tragen Sie das Balancing Gel vom Nabel bis zur Nackenmitte auf	
<b>3 - ÜBERHALB DER BLASE</b>	
• Tragen Sie das Light Fluid auf	
• Verwenden Sie den ORANGEN Farbfiler	1 min
• Tragen Sie das Balancing Gel auf	
<b>4- WIRBELSÄULE AUF HÖHE DES SOLARPLEXUS</b>	
• Tragen Sie das Light Fluid auf	
• Verwenden Sie den VIOLETTEN Farbfiler	1 min
• Tragen Sie das Balancing Gel auf	
<b>5- HALS in der Mitte des unteren Halsbereiches</b>	
• Verwenden Sie den GELBEN Farbfiler	1 min
<b>6 - OBEN AM ERSTEN RÜCKENWIRBEL</b>	
• Tragen Sie das Light Fluid auf	
• Verwenden Sie den ROTEN Farbfiler	1 min
• Tragen Sie das Balancing Gel auf	
<b>7 - SCHÄDELBASIS</b>	
• Verwenden Sie den BLAUEN Farbfiler	1 min



ANWENDUNGSSCHRITTE	Länge
<b>ABENDS (vor dem Schlafengehen)</b>	7 min
<b>1 - MITTELPUNKT DES SCHEITELS</b>	
• Tragen Sie das Light Fluid auf Ihrer Stirn auf	
• Verwenden Sie den ORANGEN Farbfiler	1 min
• Tragen Sie die Crystal Cream auf Ihrer Stirn auf	
<b>2 - OBEN AM ERSTEN RÜCKENWIRBEL</b>	
• Tragen Sie das Light Fluid auf	
• Verwenden Sie den BLAUEN Farbfiler	1 min
• Tragen Sie die Crystal Cream auf	
<b>3 - IN DER MITTE DES BRUSTBEINS (in der Mitte der Brust)</b>	
• Tragen Sie das Light Fluid auf	
• Verwenden Sie den GRÜNEN Farbfiler	1 min
• Tragen Sie die Crystal Cream auf	
<b>4- STEISSBEIN</b>	
• Tragen Sie das Light Fluid auf	
• Verwenden Sie den ROTEN Farbfiler	1 min
• Tragen Sie die Crystal Cream auf	
<b>5- MITTIG ZWISCHEN BRUSTBEIN UND NABEL (Solarplexus)</b>	
• Tragen Sie das Light Fluid auf	
• Verwenden Sie den GELBEN Farbfiler	1 min
• Tragen Sie die Crystal Cream auf	
<b>6 - WIRBELSÄULE AUF HÖHE DES SOLARPLEXUS</b>	
• Tragen Sie das Light Fluid auf	
• Verwenden Sie den VIOLETTEN Farbfiler	1 min
• Tragen Sie die Crystal Cream auf	
<b>7- STIRNMITTE</b>	
• Tragen Sie das Light Fluid auf Ihr Gesicht, Ihren Nacken und Ihr Schlüsselbein auf	
• Verwenden Sie den INDIGO Farbfiler	1 min
• Tragen Sie die Crystal Cream auf Ihr Gesicht, Ihren Nacken und Ihr Schlüsselbein auf	



# PROGRAMM 3: SEELISCHES WOHLBEFINDEN (5 Tabellen)

## Tabelle 1: DAUER 12 MIN INNERES GLEICHGEWICHT

Sie fühlen sich ausgeglichener, unbesorgter und selbstsicherer

Siehe Anwendungshinweis C (siehe Seite 16)

ANWENDUNGSSCHRITTE	Dauer
<b>1 - GESICHT, HALS, NACKEN</b>	
• Light Fluid auftragen	
<b>2 - FÜSSE</b> <i>Innere Randknochen (Reflexzone der Wirbelsäule)</i>	
• Light Fluid auftragen	
• Verwenden Sie den VIOLETTEN Farbfiler von der Ferse zu den großen Zehen des linken und rechten Fußes	jeweils 1 min
• Crystal Cream auftragen	
<b>3 - HALS, NACKEN, MITTE</b>	
• Den VIOLETTEN Farbfiler verwenden	2 min
<b>4 - GESICHT, HALS, NACKEN</b>	
• Balancing Gel auftragen	
<b>5 - FÜSSE</b> <i>Innere Randknochen (Fußreflexzone der Wirbelsäule)</i>	
• Den GELBEN Farbfiler von der Ferse bis zu den großen Zehen des linken und rechten Fußes verwenden	jeweils 1 min
• Crystal Cream auftragen	
<b>6 - SOLAR PLEXUS</b>	
• Light Fluid auftragen	1 min
• Den VIOLETTEN Farbfiler verwenden	
• Crystal Cream auftragen	
<b>Plus!</b> Crystal Cream zweimal am Tag auf den Solar Plexus auftragen!	



## Tabelle 2: DAUER 10 MIN LEBENSFUNKE

Der Lebensfunke lädt Ihre Batterien wieder auf und versorgt Sie mit geistiger und spiritueller Fitness!

Siehe Anwendungshinweis G (siehe Seite 16)

ANWENDUNGSSCHRITTE	Dauer
<b>1 - GESICHT, HALS, NACKEN, BRUSTBEIN</b> <i>1 Handbreit unter der Schlüsselbeingrube (Thymusdrüse).</i> <b>NABEL</b> <i>in einem 4 cm-Radius</i> <b>HARA LEBENSZENTRUM</b> <i>3 Fingerbreit unter dem Nabel</i> <b>STEISSBEIN</b>	
• Light Fluid auftragen	
<b>2 - STIRNMITTE</b>	
• Den GELBEN Farbfiler verwenden	1 min
<b>3 - SCHEITEL</b> <i>Höchster Punkt des Schädels</i>	
• Den VIOLETTEN Farbfiler verwenden	2 min
<b>4 - HALS</b> <i>Kehle, über dem Kehlegrübchen (Thymusdrüse)</i>	
• Den ORANGENEN Farbfiler verwenden	1 min
<b>5 - NABEL</b> <i>In einem Radius von 4 cm</i>	
• Den ROTEN Farbfiler verwenden	1 min
<b>6 - STEISSBEIN</b>	
• Den ROTEN Farbfiler verwenden	1 min
<b>7 - HARA LEBENSZENTRUM</b> <i>3 Fingerbreit unter dem Nabel</i>	
• Den GRÜNEN Farbfiler verwenden	1 min
<b>8 - BRUSTBEIN</b> <i>1 Handbreit unter der Schlüsselbeingrube (Thymusdrüse)</i>	
• Den BLAUEN Farbfiler verwenden	1 min
<b>9 - SOLAR PLEXUS &amp; GESICHT, HALS, NACKEN</b>	
• Crystal Cream auftragen	




## Tabelle 3: DAUER 13 MIN ENTSPANNUNG BEI ANGST

Sie werden immer mehr zu spirituellem Frieden finden, innere Stabilität wiedergewinnen und sich wieder sicher und geschützt fühlen

Siehe Anwendungshinweis D (siehe Seite 16)

ANWENDUNGSSCHRITTE	Dauer
<b>1 - GESICHT, HALS, NACKEN &amp; OHREN</b> <i>Ohren in einem 2 cm-Radius</i>	
• Light Fluid auftragen	
<b>2 - LINKES OHR</b> <i>In einem 2 cm-Radius</i>	
• Den BLAUEN Farbfiler verwenden	3 min
<b>3 - RECHTES AUGE, GESCHLOSSEN</b>	
• Den BLAUEN Farbfiler verwenden	1 min
<b>4 - NASENRÜCKEN</b> <i>1 Fingerbreit darüber (Drittes Auge)</i>	
• Den VIOLETTEN Farbfiler verwenden	1 min
<b>5 - RECHTES OHR</b> <i>Innerhalb eines Radius von 2 cm (0.8in)</i>	
• Verwenden Sie den grünen Farbfiler	1 min
<b>6 - LINKES AUGE, GESCHLOSSEN</b>	
• Den GRÜNEN Farbfiler verwenden	1 min
<b>7 - HINTERKOPF, MITTE</b>	
• Den GRÜNEN Farbfiler verwenden	2 min
<b>8 - HÄNDE</b> <i>Gelenkfalte, Außenrand</i>	
• Den GRÜNEN Farbfiler auf der linken und rechten Hand verwenden	jeweils 1 min
<b>9 - SOLAR PLEXUS, GESICHT, HALS, NACKEN</b> <i>(In einem 2 cm-Radius)</i>	
• Crystal Cream auftragen	

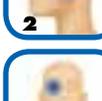

**Tabelle 4: DAUER 15 MIN  
DEBLOCKIERUNG BEI STRESS**

Ihre Energiezirkulation wird verbessert und stärkt Ihr Körperbewusstsein und bricht nach und nach die Schale auf, in die der Stress Sie eingeschlossen hat

Siehe Anwendungshinweis F (siehe Seite 16)

ANWENDUNGSSCHRITTE	Dauer
<b>1 - HÄNDE</b> Gelenkfalte, Außenrand • Den GRÜNEN Farbfiler auf der linken und rechten Hand verwenden	jeweils 2 min
<b>2 - BRUSTBEIN</b> 1 Handbreit unter der Schlüsselbeingrube (Thymusdrüse) • Light Fluid auftragen • Den GRÜNEN Farbfiler verwenden	2 min
<b>3 - SOLAR PLEXUS</b> • Light Fluid auftragen • Den GELBEN Farbfiler verwenden • Crystal Cream auftragen	2 min
<b>4 - OBERKIEFERRAND</b> unter der Augenmitte • Den VIOLETTEN Farbfiler auf der linken und rechten Gesichtseite verwenden	jeweils 1 min
<b>5 - LEBER UND GALLENBLASE</b> • Light Fluid auftragen • Den BLAUEN Farbfiler verwenden • Balancing Gel auftragen	1 min
<b>6 - NIEREN</b> • Balancing Gel auftragen	
<b>7 - GESICHT, HALS UND NACKEN</b> • Light Fluid auftragen • Crystal Cream auftragen	




**Tabelle 5: 20 MIN  
BESSERER SCHLAF (1 Stunde vor dem Schlafengehen)**

Ihre Nächte bringen Ihnen wieder erholsamen Schlaf und süße Träume

Siehe Anwendungshinweis D (siehe Seite 16)

ANWENDUNGSSCHRITTE	Dauer
<b>1 - SOLAR PLEXUS</b> Leber – Gallenblase – Magen – Milz • Light Fluid auftragen • Den GRÜNEN Farbfiler auf dem Solar Plexus verwenden	2 min
<b>2 - MILZ</b> • Light Fluid auftragen • Den VIOLETTEN Farbfiler verwenden	2 min
<b>3 - LEBER UND GALLENBLASE</b> • Den ORANGENEN Farbfiler verwenden	2 min
<b>4 - SOLAR PLEXUS</b> Leber – Gallenblase – Magen – Milz <b>BRUSTBEIN</b> 1 Handbreit unter der Schlüsselbeingrube (Thymusdrüse) • Crystal Cream auftragen	
<b>5 - HÄNDE</b> Gelenkfalte, Außenrand • Den BLAUEN Farbfiler auf der linken und rechten Hand verwenden	jeweils 1 min
<b>6 - BEINE UND FÜßE</b> • Balancing Gel auftragen	

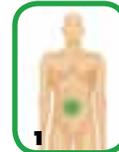

**ANMERKUNG A**

Die regelmäßige Anwendung des Programms ist wichtig, vor allem in belastenden Situationen:

- 4x pro Woche, idealerweise 1x pro Tag
- Empfohlene Anwendungsdauer: 2 Wochen

**ANMERKUNG B**

Die regelmäßige Anwendung des Programms ist wichtig, vor allem in belastenden Situationen:

- 4x pro Woche, idealerweise 1x pro Tag
- Empfohlene Anwendungsdauer: 3 Wochen

**ANMERKUNG C**

Die regelmäßige Anwendung des Programms ist wichtig, vor allem in belastenden Situationen:

- 5x pro Woche, idealerweise 1x pro Tag
- Empfohlene Anwendungsdauer: 2 Wochen

In leichteren Fällen ist die Anwendung auch sporadisch oder über einen kürzeren Zeitraum hilfreich.

**ANMERKUNG D**

Die regelmäßige Anwendung des Programms ist wichtig, vor allem in belastenden Situationen:

- 5x pro Woche, idealerweise 1x pro Tag
- Empfohlene Anwendungsdauer: 3 Wochen

In leichteren Fällen ist die Anwendung auch sporadisch oder über einen kürzeren Zeitraum hilfreich.

**ANMERKUNG E**

Die regelmäßige Anwendung des Programms ist wichtig, vor allem in belastenden Situationen:

- 5x pro Woche, idealerweise 1x pro Tag
- Empfohlene Anwendungsdauer: 4 Wochen

In leichteren Fällen ist die Anwendung auch sporadisch oder über einen kürzeren Zeitraum hilfreich.

**ANMERKUNG F**

In sehr stressigen Situationen, folgen Sie diesem Plan so oft in einstündigen Intervallen, bis sich der Druck reduziert.

Sie können auch regelmäßig über kurze und längere Zeiträume den Plan anwenden.

- 5x pro Woche, idealerweise 1x pro Tag

**ANMERKUNG G**

Das Lebensfunke-Programm ist Teil Ihrer spirituellen Medizin und kann immer und über einen beliebigen Zeitraum angewendet werden.

**ANMERKUNG H**

Idealerweise als Teil Ihrer täglichen Hygiene oder wenn Sie sich nicht gut fühlen. Weitere Anwendungen morgens oder abends können unabhängig voneinander vorgenommen werden.



## PROGRAMM 4: STOFFWECHSEL (2 Tabellen)

### Tabelle 1: DAUER 15 MIN AUSSCHIEDEN UND ENTSCHLACKEN

Sie fühlen sich erleichtert, erneuert und verjüngt. Man wird Ihnen Komplimente machen, weil Sie so viel besser aussehen.

Siehe Anwendungshinweis B  
Siehe Wichtig – Hinweis 1 (siehe Seite 18)

ANWENDUNGSSCHRITTE	Länge
<b>1 - ZUNGE UND ZUNGENGUND</b>	
• Verwenden Sie den ORANGEN - Farbfiler auf Ihrer Zunge	2 min
- auf Ihrem Zungengrund (heben Sie Ihre Zunge)	30 Sek
<b>2 - ARME</b> Von Ihrer Fingerspitze über die Oberseite des Arms zum Schultergelenk	
• Tragen Sie das Light Fluid auf	
• Verwenden Sie den BLAUEN Farbfiler auf Ihrem linken und rechten Arm je	jeweils 2 min
• Tragen Sie das Balancing Gel auf	
<b>3 - LEBER UND GALLENBLASE</b>	
• Tragen Sie das Light Fluid auf	
• Verwenden Sie den GRÜNEN Farbfiler	2 min
• Tragen Sie das Balancing Gel auf	
<b>4 - KÖRPERMITTE</b> Vom Nabel zur Blase	
• Tragen Sie das Light Fluid auf	
• Verwenden Sie den ORANGEN Farbfiler	2 min
<b>5 - BAUCH, LEISTENGEDEND, NIEREN, WIRBELSÄURE</b>	
• Tragen Sie das Balancing Gel auf	1 min



### Tabelle 2: DAUER 15 MIN VERDAUUNG

Ihre Verdauung (und Ihr Wohlbefinden) werden merklich verbessert und Sie fühlen sich leicht und unbeschwert.

Siehe Anwendungshinweis D  
Siehe Wichtig – Hinweis 1&2 (siehe Seite 18)

ANWENDUNGSSCHRITTE	Dauer
<b>1 - MAGEN UND MILZ</b>	
• Light Fluid auftragen	
• Den ORANGENEN Farbfiler verwenden	2 min
• Crystal Cream verwenden	
<b>2 - FÜSSE</b> Innerer Randknochen (Fußreflexzone der Wirbelsäule)	
• Light Fluid auftragen	
• Verwenden Sie den ORANGEN Farbfiler von der Ferse bis zum großen Zeh auf dem linken und rechten Fuß	jeweils 1 min
• Crystal Cream auftragen	
<b>3 - BAUCH (Darm)</b>	
• Light Fluid auftragen	
• Den GRÜNEN Farbfiler verwenden	3 min
• Balancing Gel auftragen	
<b>4 - HÄNDE</b> Zwischen den unteren Gelenken von Daumen und Zeigefinger (weiches Dreieck)	
• Light Fluid auftragen	1 min
• Den GRÜNEN Farbfiler verwenden	jeweils 1 min
<b>5 - SCHULTERN</b> Vom Hals bis zum Schultergelenk	
• Light Fluid auftragen	
• Den ROTEN Farbfiler auf der Oberseite der linken und rechten Schulter verwenden	jeweils 1 min
• Balancing Gel auftragen	
<b>6 - HINTERKOPF, MITTE</b>	
• Den ROTEN Farbfiler verwenden	1 min



## PROGRAMM 5: HAUT UND GEWEE

### Tabelle 1: DAUER 10-15 MIN PROBLEMLHAUT IM GESICHT ODER AM KÖRPER

Ihre Haut wird sich regenerieren und Makel, Falten und Anzeichen der Alterung verschwinden. Sie werden besser aussehen!

Siehe Anwendungshinweis D  
Siehe Wichtig – Hinweis 1&2 (siehe Seite 18)

ANWENDUNGSSCHRITTE	Dauer
<b>1 - LEISTENGEDEND, BEINE, FÜSSE</b> Leber – Gallenblase – Magen – Milz. Nabel in einem 4 cm-Radius. Füße mit Spann und Sohlen.	
• Light Fluid auftragen	
• Crystal Cream auftragen	
<b>2 - FÜSSE</b>	
• Den ORANGENEN Farbfiler verwenden, quer unter dem Ballen des linken und rechten Fußes (Fußreflexzonen des Solarplexus und der Nieren)	jeweils 1 min
<b>3 - SOLAR PLEXUS</b> Leber – Gallenblase – Magen – Milz	
• Den ORANGENEN Farbfiler verwenden	2 min
<b>4 - KOPF</b> om Haaransatz über den oberen Schädel zum Nacken	
• Den VIOLETTEN Farbfiler verwenden, 3 cm nach links und nach rechts vom Scheitel	jeweils 1 min
<b>5 - PROBLEMZONEN</b>	
• Light Fluid auftragen (außer dies wurde bereits gemäß Schritt 1 verwendet)	
• Den BLAUEN Farbfiler verwenden, je nach Größe der Problemzone	1-3 min
• Balancing Gel auftragen (außer dies wurde bereits gemäß Schritt 1 verwendet)	
• Den GELBEN Farbfiler verwenden, je nach Größe der Problemzone	1-3 min
• Crystal Cream auftragen, wenn Ihre Haut trocken ist, Crystal Cream mehrmals täglich verwenden!	



## **Tabelle 2: DAUER 20 MIN** **SCHWEREGEFÜHL IN BEINEN UND FÜßEN**

Ihr Körper wird sich vollkommen erleichtert anfühlen.

Siehe Anwendungshinweis D (siehe Seite 18)

ANWENDUNGSSCHRITTE	Dauer
<b>1 - LEISTENGEDEND, BEINE, FÜSSE</b>	
• Light Fluid auftragen	
<b>2 - SOLAR PLEXUS – LEBER – GALLENBLASE – MAGEN – MILZ</b>	
• Light Fluid auftragen	
• Den ORANGEN Farbfiler verwenden	1 min
<b>3 - LEISTENGEDEND</b>	
• Den ROTEN Farbfiler auf der linken und rechten Seite der Leistengegend verwenden	jeweils 1 min
<b>4 - BEINE</b>	
• Den GELBEN Farbfiler vom Fußgelenk nach oben verwenden	jeweils 2 min
• Balancing Gel auf Leistengegend, Beine und Füße auftragen	
<b>Plus!</b> Eine zusätzliche Anwendung von Balancing Gel auf Leistengegend, Beinen und Füßen!	
<b>5 - FÜSSE</b>	
• Den ORANGENEN Farbfiler auf der Mitte der Basis des linken und rechten Fußes verwenden	jeweils 1 min
• Den VIOLETTEN Farbfiler quer unter den Ballen des linken und rechten Fußes verwenden	jeweils 1 min
• Den GRÜNEN Farbfiler auf der Rückseite des linken und rechten Fußes verwenden	jeweils 1 min
<b>6 - GESÄSS</b>	
• Light Fluid auftragen	
• Den GELBEN Farbfiler rechts und links auf dem Gesäß verwenden	jeweils 1 min
• Balancing Gel auftragen	



## **Tabelle 3: DAUER 8-10 MIN** **GUT AUSSEHEN**

Sie werden beruhigt und erfrischt aussehen und von innen strahlen.

Siehe Anwendungshinweis I (siehe Seite 18)

ANWENDUNGSSCHRITTE	Dauer
<b>1 - STIRNMITTE</b> <i>(drittes Auge)</i>	
• Tragen Sie das Light Fluid auf das Gesicht auf	
• Verwenden Sie den VIOLETTEN Farbfiler	1 min
• Tragen Sie das Balancing Gel auf das Gesicht auf	
<b>2 - UNTERHALB DER AUGENBRAUEN AUF BEIDEN SEITEN DER NASE</b> <i>(Augen geschlossen, links, dann rechts)</i>	
• Verwenden Sie den ORANGEN Farbfiler	jeweils 1 min
<b>3 - AUF DER HINTERSEITE DES KOPFES, in der Mitte, auf Höhe der Ohren</b>	
• Verwenden Sie den INDIGO Farbfiler	1 min
<b>4 - WANGENMITTE IN EINER LINIE MIT DER PUPILLE, LINKS, DANN RECHTS</b>	
• Verwenden Sie den GELBEN Farbfiler	jeweils 1 min
<b>5 - OBERKANTE DER AUGENBRAUEN, Linie zwischen den beiden Pupillen</b>	
• Tragen Sie das Light Fluid auf	
• Verwenden Sie den GELBEN Farbfiler	1 min
• Tragen Sie die Crystal Cream auf	
<b>6 - ZWISCHEN DER OBERLIPPE UND DER NASE</b>	
• Verwenden Sie den GRÜNEN Farbfiler	1 min
<b>7 - INNERHALB DER HANDGELENKE, zuerst links, dann rechts (optional)</b>	
• Tragen Sie das Light Fluid auf	
• Verwenden Sie den ORANGEN Farbfiler	jeweils 1 min
• Apply Crystal Cream	



### **ANMERKUNG B**

Die regelmäßige Anwendung des Programms ist wichtig, vor allem in belastenden Situationen:

- 4x pro Woche, idealerweise 1x pro Tag
- Empfohlene Anwendungsdauer: 3 Wochen

### **ANMERKUNG D**

Die regelmäßige Anwendung des Programms ist wichtig, vor allem in belastenden Situationen:

- 5x pro Woche, idealerweise 1x pro Tag
  - Empfohlene Anwendungsdauer: 3 Wochen
- In leichteren Fällen ist die Anwendung auch sporadisch oder über einen kürzeren Zeitraum hilfreich.

### **ANMERKUNG I**

Wann auch immer Sie sich erschöpft und verspannt fühlen und Ihr Gesicht müde aussieht, wird Sie diese Behandlung entspannter und gut aussehen lassen! Dieses Programm ist für die tägliche Anwendung geeignet.


### **WICHTIG - HINWEIS 1**

Trinken Sie 2-3 Liter Flüssigkeit (Kräutertee, Wasser, Fruchtsaft) pro Tag. So regen Sie die Ausscheidung an und befreien damit Ihren Körper von Produkten, die den Stoffwechsel belasten.

### **WICHTIG - HINWEIS 2**

Essen Sie leichte und gesunde Speisen. Streichen Sie Süßigkeiten und fette, schwer verdauliche Speisen von Ihrem Menüplan.

Nehmen Sie abends nur wenig Nahrung zu sich.

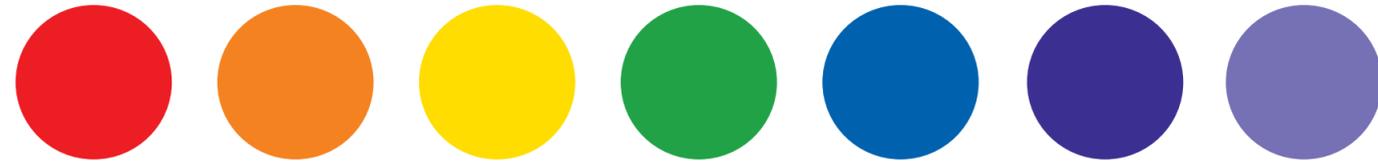

# FARBE IST ENERGIE, FARBE IST LEBEN, FARBE IST THERAPIE



## FARBLICHTTHERAPIE REFERENZEN & LITERATURHINWEISE

ANDERSON, MARY, Color Healing, The Aquarian Press, 1979  
 CAYCE, EDGAR, Auras, An Essay on the Meaning of Colors, A.R.E Press, 1973  
 CHIAZZARI, SUZY, The Complete Book of Color, Element, 1998  
 DALICHOV, IRENE and BOOTH, MIKE, Aura-Soma, Hay House Inc., 1996  
 DINSHAH, DARIUS, Let There Be Light, NJ USA, ISBN 0-933917-00-7  
 GIMBEL, THEO, Healing Through Color, The C.W.I Daniel Company Ltd., 1980  
 GIMBEL, THEO, The Color Therapy Workbook, Element, 1993  
 GRAHAM, HELEN, Healing with Color, Newleaf, 1996  
 HOLBECHÉ, SOOZI, The Power of Gems and Crystals, Piatkus, 1989  
 KELLY, JOHN, The All-Seasons Garden, Windward, 1987  
 LACY, MARIE LOUISE, Know Yourself Through Color, The Aquarian Press, 1989  
 LACY, MARIE LOUISE, The Power of Color to Heal the Environment, Rainbow Bridge Publications, 1996  
 OUSELEY, S.G.J., Color Meditations, L.N. Fowler & Co. Ltd., 1949  
 POLUNIN, MIRIAM, Healing Foods, Dorling Kindersley, 1997  
 SUN, HOWARD & DOROTHY, Color Your Life, Piatkus, 1998  
 SUNDT, THERESA, Color Therapy Presentation 2007, www.color-discovery.com  
 SUNDT, THERESA, The Art of Color Therapy, 2007  
 VERNER-BONDS, LILIAN, Color, Southwater, 1999  
 WALL, VICKY, the Miracle of Color Healing, Thorsons, 1995  
 WAUTERS, AMBIKA and THOMPSON, GERRY, Principles of Color Healing, Thorsons, 1997  
 WILLS, PAULINE, Working With Color, Hodder & Stoughton, 1999



## BIOPTRON FARBLICHTTHERAPIESET PAG-965



VERSUCHEN SIE ES DOCH MAL:  
**KOSTENLOS!**

Wenn Sie die  
**KRAFT DER FARBEN** kennenlernen  
und **IHRE PERSÖNLICHE FARBE** finden  
möchten (finden Sie heraus, was Ihre  
persönliche Farbe über Sie aussagt),  
dann...

Rufen Sie uns **EINFACH AN:**

