


CareWear® Wearable Therapeutics

Tragbares, medizinisches Lichttherapiesystem

AKTION BIS 31. DEZEMBER 2026

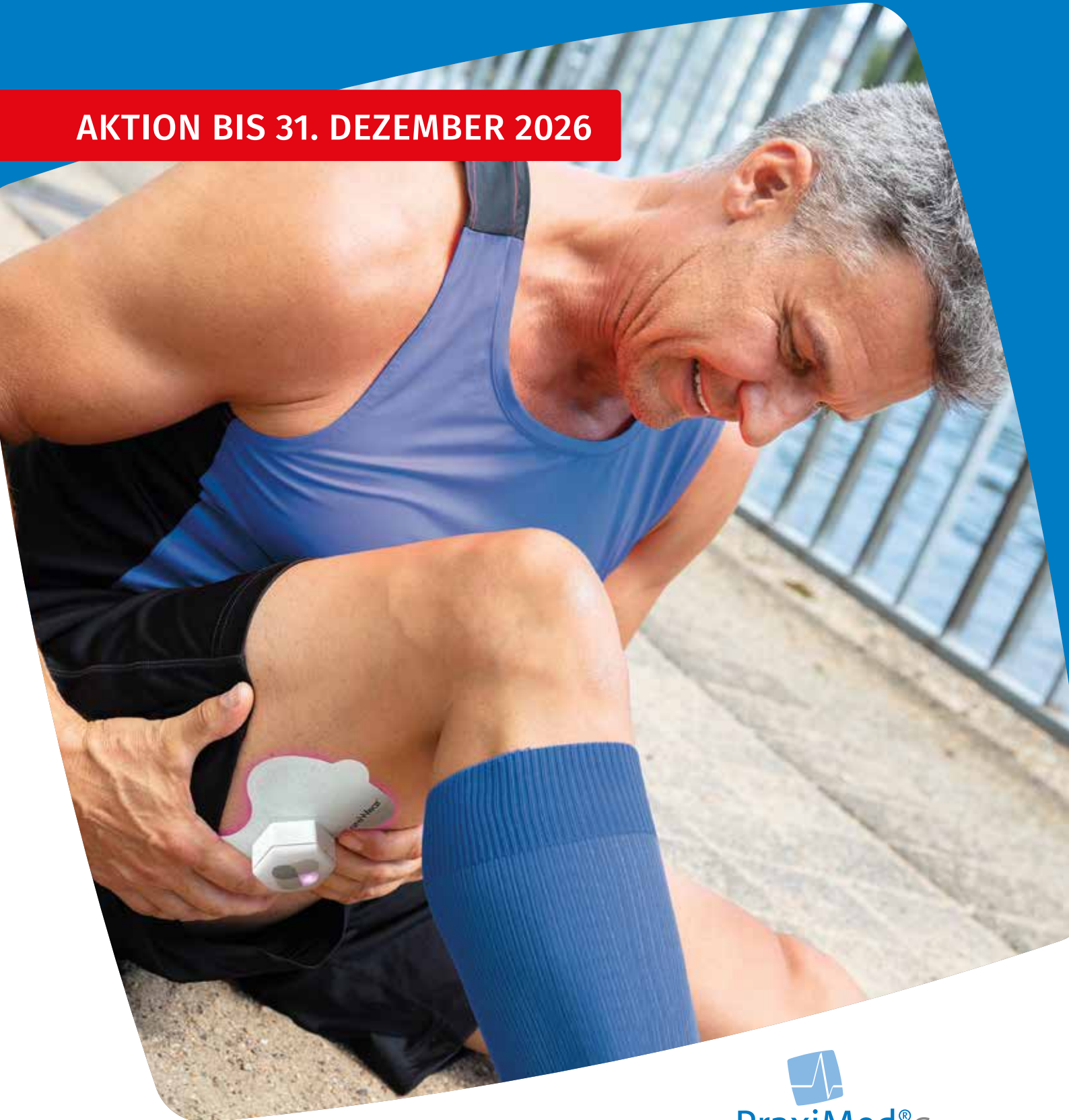

CareWear® Dual Light Therapy Kit

Das CareWear Dual Light Therapy System ist ein tragbares, kabelloses Medizingerät der Klasse II zur Schmerzlinderung und schnelleren Regeneration. Es kombiniert gepulstes rotes (640 nm, tiefenwirksam) und blaues Licht (450 nm, entzündungshemmend) mit Wärme zur Förderung der Durchblutung und Lösung von Muskelverspannungen. Es besteht aus Steuereinheit, flexiblem Light Patch und austauschbaren Hydrogel-Pads und ist dank modularem Design vielseitig einsetzbar. Die Anwendung erfolgt automatisiert (ca. 30 Minuten) und kann per Bluetooth-App überwacht werden. Bedienung: Patch aufkleben, Controller anschließen, Behandlung starten („Stick, Click and Go“).

Einsatzbereiche

- Muskel- und Gelenkschmerzen
- Muskelverspannungen
- Regeneration nach Verstauchungen oder Zerrungen
- Förderung der lokalen Durchblutung

Lieferumfang

- 2 wiederaufladbare, wasserfeste (IP67) Controller
- Ladestation inkl. USB-Kabel und 5W-Adapter
- Tragetasche sowie Anleitung
- Lichtpflaster und Hydrogel-Pads separat erhältlich



Sonderpreis

nur **895 €** netto
1.065,05 € brutto

Bestell-Nr. 761641

CareWear® Quad Light Therapy Kit

Das CareWear Quad Light Therapy Kit ist die größte Hardware-Konfiguration dieses Systems und für die gleichzeitige Behandlung mehrerer Körperregionen oder großflächiger Muskelgruppen konzipiert. Im Vergleich zum Dual-Kit verdoppelt dieses Set die Anzahl der Steuereinheiten, was es ideal für den professionellen Einsatz in der Physiotherapie oder für Sportler mit komplexem Regenerationsbedarf macht.

Vorteile der Quad-Konfiguration

- Steuerung aller vier Controller über die CareWear Clinical App
- Kombination verschiedener Patch-Größen
- erkennt den angeschlossenen Patch-Typ und stellt Therapiedosis automatisch ein

Lieferumfang

- 4 wiederaufladbare, wasserfeste (IP67) Controller
- 4-fach Ladebasis (Quad Charger)
- Tragetasche sowie Anleitung
- Lichtpflaster und Hydrogel-Pads separat erhältlich



Sonderpreis

nur **1.595 €** netto
1.898,05 € brutto

Bestell-Nr. 761642

CareWear® Light Patches

Die CareWear® Light Patches sind flexible, tragbare Lichttherapie-Pflaster für die Photobiomodulation (PBM) und ermöglichen eine gezielte LED-Lichttherapie direkt auf der Haut. Bei Bedarf können mehrere Patches kombiniert werden, um größere Behandlungsflächen abzudecken. Die Patches basieren auf einer patentierten Technologie mit bis zu 1.500 gedruckten Mikro-LEDs, die auf einer flexiblen Leiterstruktur integriert sind und mit optischen Funktionsschichten sowie einem medizinischen Hydrogel kombiniert werden.



- für bis zu 100 Anwendungen ausgelegt
- Zip-Lock-Beutel zur hygienischen Aufbewahrung

Sonderpreis

nur **79 €** netto
94,01 € brutto

Bestell-Nr. 761643

1 Stück CareWear Light Patch, Clover
Ideal für hochflexible Anwendungen an kleinen Gelenken, unregelmäßigen Oberflächen und Akupunkturpunkten

Sonderpreis

nur **79 €** netto
94,01 € brutto

Bestell-Nr. 761644

1 Stück CareWear Light Patch, Small
Ideal für lokalisierte Behandlung kleinerer anatomischer Bereiche wie Gesicht, Hals, Ellbogen, Handgelenk, Hand, Knöchel und Fuß

Sonderpreis

nur **89 €** netto
105,91 € brutto

Bestell-Nr. 761635

1 Stück CareWear Light Patch, Mittel
Ideal für mittelgroße anatomische Regionen wie Hals, Ellbogen, Knie sowie kleinere Muskelgruppen

CareWear® Hydrogel Pads

Lichtleitende, selbstklebende Hydrogel Pads dienen als haftende Schnittstelle zwischen Light Patch und Haut und unterstützen eine stabile Fixierung während der Anwendung. Gleichzeitig ermöglichen sie eine gleichmäßige optische Kopplung zwischen Lichtquelle und Hautoberfläche, wodurch die effiziente Übertragung der Lichtenergie in das behandelte Gewebe unterstützt wird. Die Hydrogel Pads sind jeweils auf die entsprechenden CareWear® Light Patch-Formate abgestimmt.



Sonderpreis

nur **26,95 €** netto
32,07 € brutto

Bestell-Nr. 716642

5 Stück CareWear Hydrogel Pads, Kleeblatt

Sonderpreis

nur **26,95 €** netto
32,07 € brutto

Bestell-Nr. 716643

5 Stück CareWear Hydrogel Pads, Small Butterfly

Sonderpreis

nur **27,95 €** netto
33,26 € brutto

Bestell-Nr. 716644

5 Stück CareWear Hydrogel Pads, Mittel Butterfly



PraxiMed® GRUPPE
Qualität. Vertrauen. Zukunft.

Stand: 30.04.2026

PraxiMed® Vertriebs GmbH
Grünhainer Straße 2 · 08297 Zwönitz
Telefon 037754 3090
info@praximed.com

PraxiMed® Meditrade® GmbH
Marktweg 3 · 01157 Dresden
Telefon 0351 8474300
meditrade@praximed.com

PraxiMed® Halle GmbH
Wilhelm-von-Klewiz-Straße 11 · 06132 Halle (Saale)
Telefon 0345 7748318
info@praximed-halle.de

Biomedizinische Technik Rostock GmbH
Trelleborger Straße 10c · 18107 Rostock
Telefon 0381 7601451
info@bmtr24.com

projekt medizin GmbH
Grünhainer Straße 2 · 08297 Zwönitz
Telefon 037754 149180
info@projekt-medizin.de

Sanitätshaus Dresden Prohlis GmbH
Georg-Palitzsch-Straße 12 · 01239 Dresden
Telefon 0351 2709898
info@sanihaus-dresden.de

Sanitätshaus Silberhöhe
Wilhelm-von-Klewiz-Straße 11 · 06132 Halle (Saale)
Telefon 0345 7748321
silberhoehe@praximed-halle.de

Gesundheitszentrum Zittau
Bahnhofstraße 9 · 02763 Zittau
Telefon 03583 7973200
info@gesundheitszentrum-zittau.de

praximed.com