



NEU - 3rd EDITION

PHYSIODYN-Expert



Professionelle Elektrotherapie und -diagnostik
für Kliniken, Rehaszentren und Physiotherapiepraxen



NEU



Mit der brandneuen
PHYSIOMED App können
Sie Behandlungsprotokolle
erstellen, archivieren und
weiterverarbeiten

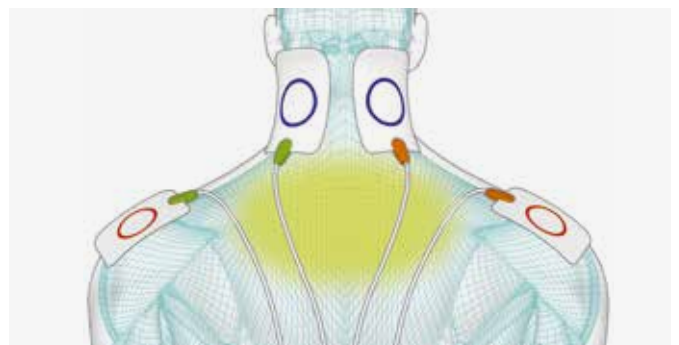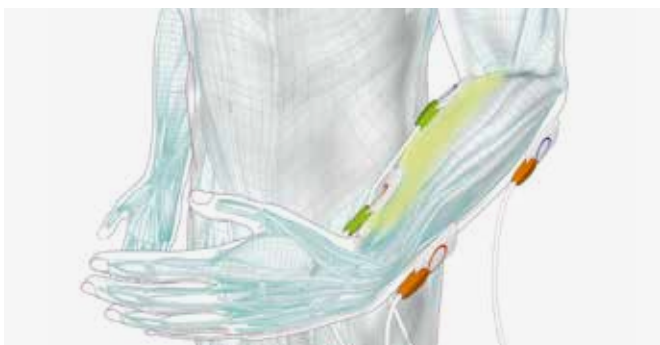



Das umfangreiche Indikationsmenü mit praktischen Filterfunktionen



Neben der Standard-I/T-Kurve bietet das Diagnostikmenü auch einen Zeit sparenden Schnelltest



TECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	1, Typ BF
Netzanschluss	100 – 240 VAC ±10 %
Netzfrequenz	50 – 60 Hz
Stromaufnahme	0,6 A / 1,2 A
Leistungsaufnahme	120 VA
Leistungsabgabe Reizstrom max.	GMC, MENS = 1.000 µA, G = 25 mA, HV, HVS, TENS = 140 mA, DF, MF, CP, LP = 70mA, UR, IG30, IG50, FM, STOCH, FaS, T/R = 75 mA, IF, AMF, MT, KOTS = 100 mA (bei 500 Ohm)
Abmessungen (B x H x T)	315 x 175 x 370 mm
Gewicht	6,2 kg

SPECIAL FEATURES

Elektrotherapie

Zweikanal-Elektrotherapie (21 Stromformen) mit Basiseinstellungen auf oberster Ebene und detaillierten Parametereinstellungen im Expertenmenü (mit Visualisierung der Stromformparameter)

6 Diagnostik-Menüs (inkl. verkürzter I/T-Kurvendarstellung); die benutzergeführte Navigation macht die diagnostische Evaluation selbsterklärend und effektiv

Alternierende und simultane Stimulation

Spastikbehandlung nach Hufschmidt und Jantsch

Handtaster als Not-Aus-Schalter oder für Intensionsübungen (optionales Zubehör)

ALLGEMEINE FEATURES

- ① Perfektionierte Bedienführung durch Kombination von Touchscreen und PHYSIOMED-Einknopfbedienung

7" Farbbildschirm mit Bildschirmschoner und Anzeige der wichtigsten Parameter der aktiven Kanäle

Favoritenmenü mit Kurzwahlspeicher individueller Gerätefunktionen

Umfassender Überblick über alle Therapieparameter und Therapietimer

Maximal schneller Einstieg in die Therapie: direkt, über Programmspeicher oder Indikations-Index

Intelligente Filterfunktionen der Indikationsliste nach Körperregion, gewünschtem Therapieeffekt oder Alphabet (mit Autovervollständigung der Indikationsnamen) für schnelle Suche des gewünschten Behandlungsvorschlags

Umfangreiche Hinweise zur Therapie mit Dosierungsvorschlägen

Einfach bedienbares und umfangreiches Speichermenü mit Potpourri-Funktion

Multifunktionale Intensitätsregler mit Intensitäts-Komfort-Ausschwellung und zum schnellen Wechsel zwischen den Kanälen

Logische Farbcodierung des Reizstrom- und Vakuumapplikationszubehörs für schnelle und sichere Zuordnung der Kanäle sowie der jeweiligen Polarität

Vakuumapplikation mit PHYSIOVAC-Expert (optional)

SD-Kartenslot für Produktupdates

STANDARDZUBEHÖR

[1] Elastik-Gewebeband (10 x 125 cm)

[1] Elastik-Gewebeband (6 x 80 cm)

[1] Gebrauchsanweisung

[1] Kurze Einführung in die Reizstromtherapie

[1] Netzkabel

[1] Patientenkabel

[4] Plattenelektroden EF 50

[4] Viskosetaschen EF 50