


KINDER Infusionsständer "Regenbogen - gelb"

mit Flugzeugrollen

I-HA4130

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendungsbereich	Kinderstation
Material	Aluminium/ Kunststoff
Farbe der Kunststoffteile	Gelb, Blau, Grün
Infusionshalterung	Kunststoff
Anzahl der Haken	4
Anordnung der Haken	90° zueinander
Maximale Länge/Höhe	2.100 mm
Minimale Länge/Höhe	1.275 mm
Innenrohrdurchmesser	Ø 18 mm
Außenrohrdurchmesser	Ø 25 mm
Länge Außenrohr	1.000 mm
Fußgröße	Ø 660 mm
Rollentyp	Flugzeug - Doppelaufrolle
Rollendurchmesser	Ø 50 mm
Sterilisierbares Abtropfglas	Ja
Gesamtzuladung (kg)	8
Zuladung pro Aufhängung (kg)	8
Zuladung pro Haken (kg)	2

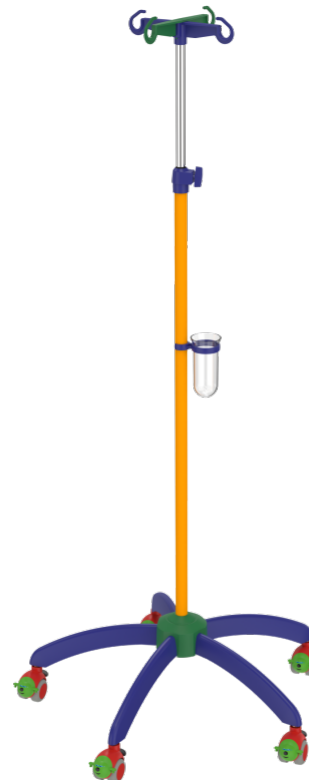

VERPACKUNGSEINHEIT: PAAR

Breite Box1	0,19 m
Höhe Box1	0,1 m
Länge Box1	1,19 m
Gewicht Box1	6,5 kg

VERPACKUNGSEINHEIT: STÜCK

Breite Box1	0,19 m
Höhe Box1	0,1 m
Länge Box1	1,19 m
Gewicht Box1	3,5 kg





Versandoptimierte Verpackung
bis zu 50 Stück auf einer Palette



Aufbauzeit
2 - 3 Minuten



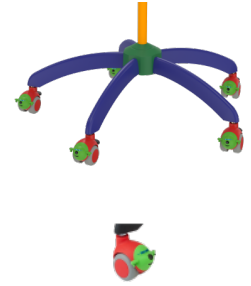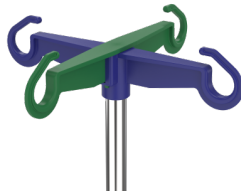

Anwendung

sehr einfache und schnelle Montage durch Stecksystem mit nur 1 Schraube

komfortable Höhenverstellung mittels Schraubhöhenverstellung mit integriertem, oberflächenschonendem Formklemmelement



Technik

Alle Kunststoffteile sind lichtecht

Die integrierte Auszugsbegrenzung verhindert das Trennen der verstellbaren Rohre

Sicherheitsflaschenkreuz nach DIN ISO 15375

das Eintreten von hygienisch sensiblen Flüssigkeiten wird durch die patentierte Dichtkappe verhindert



Sicherheit

Geringe Klemmgefahr beim Ein- und Ausfahren des Statives dank eingebautem Sicherheitsabstand

Keine Verletzungsgefahr durch abgerundete Form der Flaschenhaken

Die Geometrie der Haken verhindert das Herausfallen der Infusionsflasche