

sita.



SITA. VARIATIONSLIEGE FÜR ALLGEMEINMEDIZIN, PRAXEN UND KLINIK.

 **GREINER**




sita.

SITA. VARIATIONSLIEGE FÜR ALLGEMEINMEDIZIN, PRAXEN UND KLINIK.

SITA zeichnet sich durch ihre Anpassungsfähigkeit, praxisgerechtes Zubehör und ihr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Ob als Standmodell oder fahrbar, ist sie speziell bei Blutabnahme und Infusionstherapie oder auch als Behandlungs- oder Ruheliege zur Stelle. Die großzügigen Polsterflächen, auf Wunsch aus superweichem GREINER Premiummaterial, das Kopfpolster und die soft ausgeführten Armauflagen prägen den hohen Patientenkomfort.

Die Bedienung ist so einfach wie zweckmäßig: Der handliche Einstellhebel am Sitz bewegt die Liegefläche durch das Patientengewicht stufenlos sanft bis in die Waagrechte. Ebenso reguliert er die Beinauflage. Bei Entlastung richtet sich die Liege selbstständig wieder auf – bewegt durch eine Gasdruckfeder. Perfekte Ergonomie für die Patienten. Und hilfreiche Entlastung für das Pflegepersonal, dessen Aufgaben durch ein stabiles Untergestell für Patientengewichte bis zu 220 kg, lenkbare 10-cm-Rollen und Schubbügel beim fahrbaren Modell unterstützt werden. Für die Blutabnahme lässt SITA die Wahl zwischen einer gepolsterten schwenkbaren Armauflage mit Doppel-Kugelgelenk oder einer Armauflage aus schwarzem Integralschaum, hygienisch leicht zu desinfizieren und drehbar über ein funktionales Scharniergelenk. Weiteres Zubehör rundet das Angebot ab.

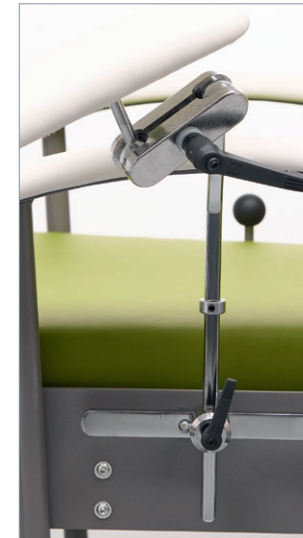

Blutabnahme-Armauflagen zur Wahl: Gepolstert in Weiß nach Farbkarte, mit rundum perfekter Positionierung durch das Doppel-Kugelgelenk – oder aus Vollschaum in Schwarz, perfekt zu desinfizieren, positionierbar durch ein Scharniergelenk




Ergonomische Armposition auf der gepolsterten Armauflage



Patiententisch mit Halter, schwenk- und abnehmbar



Untergestell und 10-cm-Rollen für Patientengewicht bis 220 kg

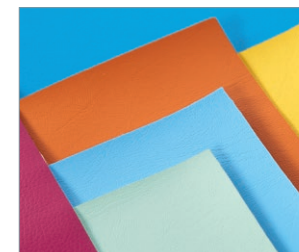

Vielfältige Farbvarianten in den Bezugstoffen compact/premium

SITA VARIATIONSLIEGE.

- ♦ Variationsliege als Stand- oder fahrbares Modell
- ♦ Rückenlehne und Beinteil separat stufenlos bis zur Waagrechten einstellbar
- ♦ Hoher Komfort dank breiter Sitzfläche, Kopfpolster und soft ausgeführter Armauflagen
- ♦ Robustes Untergestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit langlebiger Mechanik – Patientengewicht bis 220 kg



SITA in Premiummaterial Grass/White mit gepolsterter Blutabnahme-Armauflage links an der Normschiene und Infusionsstange im Halter



Einstiegsposition



Sitzposition



Relaxposition



Bettposition/Flachlage

SITA – Zubehör

- ♦ Premiummaterial nach Farbkarte (Polster, Kopfpolster und gepolsterte Armauflagen)
- ♦ Blutabnahme-Armauflagen links oder rechts und Halter für Normschiene mit Höhenverstellung, Ausstattung zur Wahl: Gepolstert nach Farbkarte, mit Doppel-Kugelgelenk flexibel rundum dreh-, schwenk- und neigbar. Oder aus Vollschaum in Schwarz, perfekt zu desinfizieren, schwenk- und neigbar durch ein Scharniergelenk
- ♦ Normschiene (Paar)
- ♦ Infusionsständer mit Halter
- ♦ Patiententisch schwenk- und abnehmbar, rechts montiert
- ♦ Urinbeutelhalter links und rechts (Paar)
- ♦ Klarsicht-Schutzfolie für Beinauflage

Maße und technische Daten

♦ Sitzbreite	50 cm
♦ Sitztiefe	49 cm
♦ Gesamttiefe in Sitz-/Liegeposition	82/185 cm
♦ Gesamthöhe (ohne Zubehör)	126 cm
♦ Liegefläche	185 x 50 cm
♦ Sitzhöhe	55 cm
♦ Maximales Patientengewicht	220 kg
♦ Gewicht	41 kg
♦ Gesamtbreite	63 cm
♦ Rollendurchmesser	100 mm



we design quality.

Die Freude am gesunden und angenehmen Sitzen treibt uns seit 1922 an. Seit vielen Jahrzehnten auch mit qualitativ und technisch hochwertigen Liegen im Bereich medbest: Innovative Entwicklungen „made in Germany“ für Untersuchung, Dialyse, Onkologie, Blutabnahme, Pflege und Transport. Bestätigt wird unser Qualitätsversprechen durch ein unabhängig geprüftes Qualitätssicherungssystem – GREINER ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und 13485.



GREINER

GREINER GmbH
Wettestraße 1 · 74385 Pleidelsheim · Germany
T +49 7144 81120 · F +49 7144 8112 99
info@greiner-gmbh.de · www.greiner-gmbh.de