

Cardio 400 CYCLE 407/457


Profi-Technik für Diagnose und Therapie

Die CARDIO LINE 400 MED wurde speziell für den professionellen Einsatz in der medizinischen Therapie entwickelt. Die Linie wurde nach der Medizinrichtlinie 93/42/EWG entwickelt und ermöglicht ein gezieltes Training des Herz-Kreislauf-Systems, inklusive präziser Trainingskontrolle, zuverlässiger Leistungsdiagnostik und der Diagnose von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Mit der Cardioline 400 Med ist mittels exakter Belastungssteuerung ein kontrolliertes Training im optimalen Leistungsbereich möglich. Darüber hinaus bestechen Medizinprodukte von ERGO-FIT® durch sehr niedrige Geräuschemissionen und einen geringen Wartungsaufwand.

Die Vorteile der CARDIO LINE 400 MED:

- Einfache Bedienung mit nur vier Tasten
- Extra breiter Durchstieg
- Hohe Standfestigkeit und Belastbarkeit bis 180 kg
- Horizontale und vertikale Sattelverstellung (bei CYCLE 457 mit Gasdruckfeder)
- Pulsgesteuertes Training
- Frei programmierbare Benutzerprofile (Steigungs-, Last- und Herzfrequenzprofile bei CYCLE 457), WHO-Profil

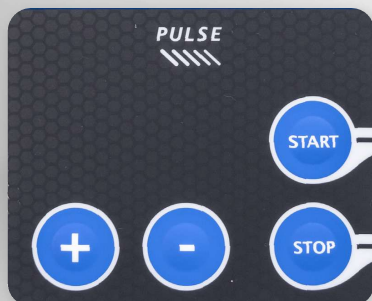

Vorbildliche Bedienung: Für Beginn und Ende des Trainings sowie zur Auswahl von Profilen und Trainingsparametern genügen vier Tasten.



Erste Wahl für Diagnose und Medizintraining in Praxen und Gesundheitseinrichtungen: Über eine auf Wunsch erhältliche RS 232 Schnittstelle des CYCLE 457 kann ein EKG zur effektiven Analyse und Überwachung der Vitalwerte eines Trainierenden angeschlossen werden.



Die ideale Ergonomie, der tiefe Einstieg und die zertifizierte Genauigkeit nach Medizin-Norm machen die kompakte Cardio Line 400 Med zum idealen Trainingsgerät im diagnostischen Bereich.

Cardio 400 CYCLE 407/457



Technische Daten

	Cycle 407 MED	Cycle 457 MED
Anzeigenparameter	Watt, Pulse, Time, Dist., 1/Min, kcal	Watt, Pulse, Time, Dist., 1/Min, kcal, km/h
Testprogramme	–	PWC 130, PWC 150, PWC 170
Trainingsprogramme	Manuell, Cardio, Countdown, WHO-Profil	Manuell, Cardio, Countdown, WHO-Profil, Profile, Benutzerprofile, EKG-Auswahl, Test RS 232 möglich
Schnittstellen	–	
Ansteuerung	drehzahlunabhängig	
Abstufung/Schritte	5 W	
Versorgungsspannung	220 – 240 V~	
Trägheitsmoment	11+/- 2kg· m ²	
Gerätemaße (L/B/H cm)	120/62/140	
Gerätengewicht	ca. 55 kg	
Drehzahlbereich	20 – 120 1/min	
Leistungsbereich	15 – 400 W	
Genauigkeit	5%, DIN VDE 0750-238	
Max. Gewichtsbelastung	180kg	
Pulsmessung	1-Kanal, EKG-genau, mit POLAR-Sender (in der Lieferung nicht enthalten)	

Die Unterschiede zwischen dem Cycle 407 und 457 :

Cycle 407



Display mit 2 Zeilen

Cycle 457



Display mit 4 Zeilen



Vertikale Verstellung durch Handgriff mit Rastbolzen



Vertikale Verstellung mit Gasdruckfeder