



NEU

+ Sehr starke
Exsudatbelastung?

Wir
lösen das

Mit dem kompromisslosen Exsudatmanagement des DURAMAX[◇] N
nicht haftenden superabsorbierenden Wundverband¹.

Genau dann, wenn Sie es brauchen.

Smith+Nephew



DURAMAX[◇] N

Nicht haftender
superabsorbierender Wundverband

Leistung, Schutz und maximale Absorption...



MAXIMALE ABSORPTION

DURAMAX[°] N nicht haftender superabsorbierender Wundverband sorgt für ein effektives Exsudatmanagement:



ABSORPTION

Der Verband **absorbiert auch visköses Exsudat** und schließt es zuverlässig ein.¹



ANPASSUNGSFÄHIG

Passt sich der **Haut** und **Wundkonturen** an.




KOMPRESSION

Der Wundverband kann auch **unter Kompression** Exsudat aufnehmen und einschließen.^{1,†}



ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ

DURAMAX[°] N absorbiert eine große Menge an Exsudat und bietet gleichzeitig einen hohen Tragekomfort für Patienten:

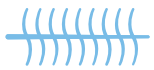

ATMUNGSAKTIV

Die Topschicht ist **atmungsaktiv und wasserabweisend**^{1,2}.



AUFNAHMEKAPAZITÄT

Der Verband **minimiert das Risiko von Mazeration und Irritation des Wundbetts** und des umliegenden Gewebes durch Exsudat.¹



BAKTERIENEINSCHLUSS

Über 99% der Bakterien werden im Verband eingeschlossen und von der Wunde ferngehalten.^{*3}

*Getestet in vitro an Pseudomonas aeruginosa und Methicillin-resistent Staphylococcus aureus; ±40mmHg



OPTIMALES EXSUDATMANAGEMENT

DURAMAX[°] N nicht haftender superabsorbierender Wundverband ist indiziert zur Anwendung bei akuten und chronischen Wunden mit **sehr starker Exsudation**.

Typische Wunden sind:



DIABETISCHE
FUSSULZERA



DEKUBITUS



VENÖSE und
ARTERIELLE ULZERA



VERBRENNUNGEN
1. und 2. GRADES



POST-OP
WUNDEN



TRAUMATISCHE
WUNDEN

5-lagige Struktur von DURAMAX[°] N:

Topschicht (SMS)

- Atmungsaktiv und wasserabweisend^{1,2}

Superabsorbierende Kernschicht

- Absorbiert und hält Exsudat zurück¹

Hydrophile Polypropylen (PP)- Vliesstoffschicht

- Absorbiert Exsudat, leitet es schnell und gleichmäßig weiter¹

Wundkontaktschicht bestehend aus einem hydrophilen Polyethylen (PE)/Polyethylenterephthalat (PET)

- Komfortable Wundkontaktschicht, absorbiert und leitet Exsudat¹ ab



... wenn es darauf ankommt

DURAMAX[®] N nicht haftender Wundverband ist einfach zu applizieren:

- Kann unter **Kompression** verwendet und mit einem Sekundärverband fixiert werden



Wählen Sie eine Verbandgröße, die **groß genug ist, um die Wundränder** um mindestens 2–3 cm zu überlappen



Legen Sie **den Verband vorsichtig direkt** auf die Wunde, wobei die weiße hydrophile Seite zur Wundfläche zeigt



Der **Verband muss mit einem geeigneten Sekundärverband fixiert werden**, zum Beispiel mit einem Fixierpflaster, einer elastischen Binde oder einem Druckverband

Bestellinformation DURAMAX[®] N nicht haftender Wundverband

Artikelnummer	PZN*	Größe Verband	Größe Wundauflage	Stk./Pkg.
66807730	1979 3291	10 cm x 10 cm	7,5 cm x 7,5 cm	10
66807731	1979 3316	15 cm x 20 cm	12,5 cm x 17,5 cm	10
66807732	1979 3322	20 cm x 20 cm	17,5 cm x 17,5 cm	10
66807733	1979 3339	20 cm x 25 cm	17,5 cm x 22,5 cm	10
66807734	1979 3345	20 cm x 40 cm	17,5 cm x 37,5 cm	10

Pharmazentralnummer, Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf (regionsabhängig)



MEHR WISSEN ALS ALLE ANDEREN?

Jetzt den Smith & Nephew
E-Mail Newsletter bestellen!

References: 1. Test Report NO:JCSQ2025021910 from Winner Medical Lab. 2. Test Report (NO: JY2-241102-02) from Winner Medical Lab. 3. Test Report NO:JY2025040701) from Winner Medical Lab.

Ausführliche Produktinformationen, einschließlich Anwendungsgebieten, Kontraindikationen, Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen, finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Produkts, bevor Sie es verwenden. Die Produkte sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar, da die Produktverfügbarkeit von den regulatorischen und/oder medizinischen Praktiken in den einzelnen Märkten abhängt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Smith+Nephew-Vertreter oder Distributor, wenn Sie Fragen zur Verfügbarkeit von Smith+Nephew-Produkten in Ihrer Region haben. Die in diesem Leitfaden dargestellte Wunde ist nur zu Demonstrationszwecken künstlich erzeugt worden.

Wundmanagement Deutschland
Smith & Nephew GmbH
Van-der-Smissen-Straße 9
22767 Hamburg

T +49 (0) 40 8797 44-350
F +49 (0) 40 8797 44-375

www.smith-nephew.de
info@smith-nephew.com

© 07/2025 Smith+Nephew
♦ Markenzeichen von Smith+Nephew, AWM-AWC-47852

ABGABE NUR AN FACHKREISANGEHÖRIGE

Hersteller: WINNER MEDICAL CO., LTD., Winner Industrial Park, No.660
Bulong Road, Longhua District, 518109 Shenzhen, China
Distributed by: Smith+Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull,
HU3 2 BN England