

Pleurofix®

Mehr Sicherheit in Handhabung und Hygiene

Geschlossenes Pleurapunktionsbesteck



Pleura Drainage Systeme

Pleurofix® Geschlossenes Pleurapunktionsbesteck

Überleitungsschlauch mit Standardkegel (Pleurofix® Nr. 2) oder mit Lock-Ansatz und Dreivegehahn (Pleurofix® Nr. 1 – nicht abgebildet)	
Doppelrückschlagventil (Pleurofix® Nr. 2) oder mit Dreivegehahn (Pleurofix® Nr. 1 – nicht abgebildet)	
Omnifix®-Lock: Leichtgängige 60 ml Omnifix®-Spritze	
Dünnwand-Punktionskanüle: Punktion am indikationsgemäßen Ort	
Sekretbeutel: Graduierter Sekretaufangbeutel mit 2 Liter Fassungsvermögen	

Pleurapunktion

Ansammlungen von Luft und/oder Flüssigkeit im Pleuraraum können zu lebensbedrohlichen Störungen der Atem- sowie Herzfunktion führen. Ziel jeder Notfalltherapie ist daher, die Beseitigung der Luft oder Flüssigkeit zu garantieren. Dies geschieht mittels einer einmaligen Nadelpunktion zur Entfernung von Luft oder Flüssigkeit.


Pleurofix® Anwendungsgebiete

- Sekretentfernung aus dem Pleuraraum
- Pneumothorax
- Spülung des Pleuraraumes
- Medikamenteninstillation

Pleurofix® Nr. 1

Dreiwegehahn

- Bedienungsfreundlich mit Richtungsanzeige
- Möglichkeit der Medikamenteninstillation

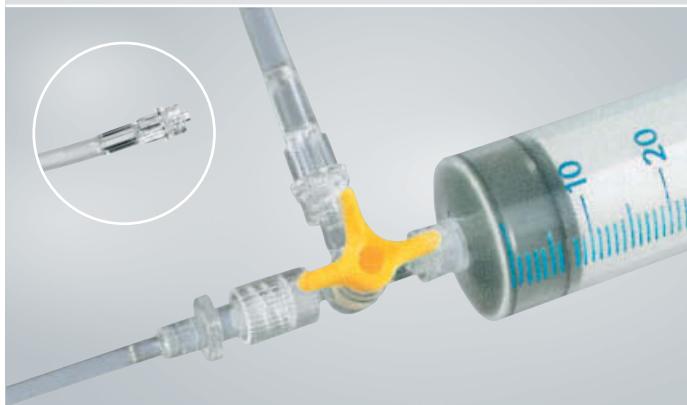

Pleurofix®, Besteck zur Pleurapunktion	Art.-Nr.	VE
Pleurofix® Nr. 1 mit Discifix®-Dreiwegehahn, gelb ▪ Dünnwand-Punktionskanüle mit Kurzschliff 1,8 x 80 mm ▪ Überleitungsschlauch mit Lock-Ansatz ▪ Omnifix®-Lock Einmal-Spritze 60 ml ▪ Sekretbeutel 2,0 l	4461002	25
Sekretbeutel passend an Pleurofix® Nr. 1 ▪ Lock-Ansatz (männlich) ▪ Überleitungsschlauch 90 cm ▪ 2,0 l ▪ einzeln verpackt, steril	4462009	100

Pleurofix® Nr. 2

Doppelrückschlagventil

- Kein Rückfluss von Flüssigkeiten zum Patienten
- Leichtes Aspirieren der Flüssigkeiten und schnelles Überleiten in den Sekretbeutel



Pleurofix®, Besteck zur Pleurapunktion	Art.-Nr.	VE
Pleurofix® Nr. 2 mit Doppelrückschlagventil ▪ Dünnwand-Punktionskanüle mit Kurzschliff 1,8 x 80 mm ▪ Überleitungsschlauch mit Standardkegel ▪ Omnifix®-Lock Einmal-Spritze 60 ml ▪ Sekretbeutel 2,0 l	4461037	25
Sekretbeutel passend an Pleurofix® Nr. 2 ▪ Standardkegel ▪ Überleitungsschlauch 90 cm ▪ 2,0 l ▪ einzeln verpackt, steril	4423208	100

Anwendung

Die Punktion muss unter aseptischen Bedingungen erfolgen. Kanüle und Spritze ankoppeln an Dreiwegehahn bzw. Verlängerungsschlauch. Kanüle durch entsprechende Stellung des Dreiwegehahns absperren. Punktion durchführen und Kanüle bis in den Pleuraspalt vorschieben. Sekret in die Spritze saugen und danach in Beutel überführen*. Nachlaufendes Sekret ebenfalls entfernen. Kanüle aus Pleuraraum herausziehen.

* bei Pleurofix® Nr. 1 Dreiwegehahn verstellen;
bei Pleurofix® Nr. 2 übernimmt das Doppelrückschlagventil die Funktion des Dreiwegehahns.
Verstellen entfällt daher.

Anwendungsvorteile

- Geschlossenes System durch luft- und flüssigkeitsdichte Luer-Lock-Sicherheitsverbindung
- Rasche Drainage des Pleuraraumes
- Atraumatische Punktion
- Möglichkeit der Medikamenteninstillation

