

Domotherm® Insektenstichheiler smart

Schmerzlinderung
nach einem Stich
oder Biss!



-  Schnelle Linderung von Juckreiz und Schwellung
-  Chemiefreie Behandlung
-  Klein, handlich mit praktischem Schlüsselanhänger
-  2 Programme für die ganze Familie
empfindliche Haut: 3s - 50 °C
normale Haut: 6s - 50 °C



inkl. praktischem
Schlüsselanhänger

Domotherm Insektenstichheiler smart

Ihr schneller Helfer gegen Juckreiz und Schwellungen!
Mit gezielter Wärmeanwendung bringt der Stichheiler
wirksame Linderung, genau da, wo Sie sie brauchen.

- Passend für USB-C Smartphone-Anschluss (Android oder ab iPhone 15)
- 2 Programme: empfindliche Haut: 3s - 50 °C
normale Haut: 6s - 50 °C
- Medizinprodukt zertifiziert nach ISO 13485
- inkl. praktischem Schlüsselanhänger
- Chemiefreie Behandlung
- 6er HV-Display



So behandeln sie schnell und
effektiv Stiche oder Bisse:



1. Stichheiler in die
USB-C-Buchse des
Smartphone stecken.

Das grüne pulsierende
Licht signalisiert die
Bereitschaft.



2. Stichheiler auf die
betroffene Stelle halten.

Die Behandlung startet
und endet automatisch.





3. Für längere Behandlung
mit dem Stichheiler
zweimal auf den Stich
tippen (blaues Licht
leuchtet).

Model: IB 50E

PZN-19989545

Art. Nr. 15020

 AOI HEALTH Technology Co., Ltd.
Room 202, Building 5, Shuihe Industrial Park, Sanwei
Community, Hangcheng Street, Bao'an District,
518126 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
 Share Info GmbH
Am Schulzentrum 12, 41564 Kaarst, Germany
SRN: DE-AR-000005132

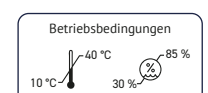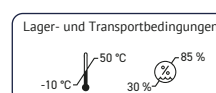

2025-06

Importeur UEBE Medical GmbH
Bgm.-Kuhn-Straße 22
97900 Kilsheim, Deutschland

 Medizin-
produkt

 0598

 UEBE
Germany est.1890